



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

# **PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2023**



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE  
SAN JOSÉ - CALDAS E.S.E**

**“NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR”**



## CONTENIDO

1. Introducción
2. Información General
3. Plataforma Estratégica
4. Definición Mantenimiento Hospitalario
5. Objetivos del Mantenimiento Hospitalario
6. Objetivos del Plan de Mantenimiento
7. Plan de Mantenimiento
8. Formato para la verificación de los diferentes aspectos del mantenimiento
9. Recursos y presupuesto del mantenimiento hospitalario



## 1. INTRODUCCIÓN

El Hospital Departamental San José de San José de Caldas elaboró para el año 2023 el plan anual de mantenimiento hospitalario el cual describe los objetivos y metas propuestas para el presente año. En él se especifica cuáles son los equipos de dotación, biomédico, muebles para uso administrativo y asistencial, equipos de comunicación e informática y de infraestructura que son objeto de mantenimiento correctivo y preventivo para el funcionamiento correcto de los diferentes servicios de la institución, prestando un servicio con calidad y seguridad.

En el presente informe se especifica además los recursos financieros de conformidad con el artículo 9 del Decreto 1769 de 1994, para el año en curso, el cual tiene una asignación del 5% de los recursos.

El plan anual de mantenimiento es elaborado por el Jefe de mantenimiento y el director de la institución en compañía y asesoría de la oficina de Control Interno, el cual ha sido aprobado y socializado con el personal de salud.



## 2. INFORMACIÓN GENERAL:

- Nombre: Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE
- Dirección: Carrera 2ª N° 5-14
- Teléfono: 3116302529-3113165515
- Correo Electrónico: hosajo5@gmail.com
- Representante Legal: Cristian Camilo Gallego Aguirre
- Inicio de Actividades: 01 de mayo de 2020
- Naturaleza Jurídica: Pública
- Habilitación de todos los servicios de baja complejidad y algunos de mediana complejidad.
- Segundo Hospital del Departamento acreditado por la UNICEF como Institución IAMI: Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia.

### 2.1 Historia del hospital:

El primer centro asistencial de que se tenga conocimiento funcionó al frente de la actual Alcaldía con una enfermera y un médico que venían de la vecina localidad de Belalcazar cada ocho días y cuyos medicamentos se limitaban más a las bebidas naturales y pocimas que el mismo preparaba.

En el año de 1956 se construyó la primera etapa como puesto de socorro, que más tarde se denominó centro de salud hasta el año de 1998. El sitio donde está asentado el Hospital era un barranco de gran altura, predio que pertenecía al corregimiento y donde cuentan que a principios del siglo pasado existió un cementerio y que más tarde funcionó por algún tiempo la escuela urbana de niños. Esta construcción se logró con aportes así:

Comité de cafeteros: 50%

Secretaría de Salud Departamental: 25%

Corregimiento: 25%

La inauguración de esta obra estuvo a cargo del Gobernador del Departamento de dicha época el Coronel Gustavo Sierra Ochoa.

A partir del 8 de septiembre de 1998 y de acuerdo a las gestiones del entonces Director Dr. Jairo Franco Londoño, el centro de salud se convirtió en Hospital Departamental de primer nivel de atención.



### 3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

#### MISIÓN

“Somos un Hospital Departamental que ofrece servicios de baja complejidad alineados con políticas nacionales y departamentales, comprometidos con la seguridad del paciente, encaminados en procesos de acreditación y administrando los recursos para lograr un equilibrio suficiente que nos lleve a brindar un servicio integral en salud, con calidad técnico-científica para los habitantes del Municipio de San José de Caldas”.

#### VISIÓN

“Proyectamos la ESE Hospital Departamental San José De San José Caldas, como una entidad integrada y auto sostenible, para prestar los servicios de primer nivel contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en todas las etapas del ciclo vital, garantizando cobertura, equidad, accesibilidad y adaptabilidad de los servicios a las necesidades específicas del usuario, familia y comunidad enfocados en la realización de los procesos necesarios para alcanzar los estándares de acreditación.”

#### PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

- **JUSTICIA:** Disposición para actuar con equidad y probidad en relación con las personas, los procesos y las decisiones.
- **SOLIDARIDAD:** Entender y cooperar con los requerimientos y necesidades de la población en general.
- **HONESTIDAD:** El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y recato, tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la empresa y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en general.



- **PARTICIPACION:** Cada funcionario, será protagonista activo de los procesos de trabajo, orientados al beneficio de la comunidad.
- **SERVICIO:** Prestación y aplicación humana del trabajo que satisface necesidades a personas, comunidades y organizaciones.
- **MEJORAMIENTO CONTINUO:** La entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad.
- **OPORTUNIDAD:** Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación del servicio a los usuarios.
- **EFICACIA:** Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los resultados esperados.
- **EFICIENCIA:** Mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a los cuales da derecho la seguridad social sean prestados en forma, adecuada, oportuna y suficiente.

## VALORES ETICOS

- **CALIDAD HUMANA:** Atención solidaria, tolerante, responsable y paciente, con personal calificado e idóneo para su labor.
- **CALIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA:** Atención integral al usuario, aplicando una adecuada utilización de los recursos, desde un sistema de control interno para la garantía de la calidad y satisfacción del usuario y su familia.
- **EQUIDAD:** Atención sin discriminación de raza, sexo, religión, cultura, estrato o movimiento político.
- **TRABAJO EN EQUIPO:** Servidores del hospital siempre trabajando en conjunto por el bienestar de los usuarios y la comunidad.



#### 4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- **CONSULTA EXTERNA INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIA:** (Medicina General, Odontología, psicología,)
- **URGENCIAS** (Las 24 horas)
- **HOSPITALIZACION** (Las 24 Horas).
- **PEQUEÑA CIRUGIA Y ATENCION DE PARTOS** (Las 24 Horas).
- **AYUDAS DIAGNOSTICAS** (Laboratorio Clínico I Nivel, Electrocardiograma, Rayos X)
- **SANEAMIENTO AMBIENTAL** (educación en tenencia responsable de mascotas, calidad del agua y vacunación antirrábica caninos y felinos)
- **PROGRAMAS COMUNITARIOS**
  - \* Promoción y Prevención:
    - Vacunación
    - Atención a través de servicios extramurales
    - Detección de alteraciones de: crecimiento y desarrollo, joven, adulto mayor, agudeza visual, embarazo, cáncer de seno y cervico-uterino
    - Atención: Planificación familiar, recién nacido, puerperio, parto
    - Atención primaria social (APS)
  - \* Plan de Intervenciones colectivas:
    - Programa Ampliado de Inmunizaciones
    - Salud Pública
    - Salud Sexual Reproductiva
    - Prevención y control de enfermedades crónicas y cardiovasculares
    - Salud Mental
    - Jornadas Saludables en área rural (unidad móvil)
- **FARMACIA** (Incluyendo los medicamentos del POS-S Y POS.C)
- **AMBULANCIA** (Las 24 horas)
- **VALORACIÓN MÉDICO LEGAL.**



## 5. PERSONAL DISPONIBLE:

GERENTE	1
MEDICOS	3
COORDINACIÓN PYP	1
ODONTOLOGA GENERAL	1
BACTERIOLOGA	1
FACTURACION	2
ENFERMERA JEFE	2
AUXILIARES DE ENFERMERÍA	3
AUXILIAR DE VACUNACIÓN	1
AUXILIAR DE PE Y DT	1
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	1
REGENTE	1
PROMOTORAS DE SALUD	2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
TECNICO EN SANEAMIENTO	1
CONDUCTOR	1
JEFE DE MANTENIMIENTO	1
SERVICIOS GENERALES	2
AUXILIAR DE ESTADISTICA	1
PSICOLOGIA	1
ASESOR JURIDICO	1
ASESOR CONTABLE	1



## 6. INFRAESTRUCTURA:

El Hospital San José cuenta actualmente con:

1. Una Sala de Urgencias con dos (2) camillas
2. Sala de Reanimación
3. Una Sala de Partos
4. Una Sala para toma de Citologías
5. Un proceso de esterilización
6. Dos Salas de espera
7. Una Sala de reuniones
8. Una Farmacia
9. Un Almacén
10. Un Laboratorio Clínico
11. Un Equipo de RX para Odontología
12. Hospitalización Sala General mujeres con dos (2) camas
13. Hospitalización Sala General hombres dos (2) cama
14. Hospitalización Pediatría (1) cama
15. Tres Consultorios Médicos
16. Un consultorio de psicología.
17. Un Consultorio Odontológico
18. Un Consultorio de vacunación
19. Oficina Dirección
20. Oficina de Saneamiento Ambiental
21. Oficina de Archivo
22. Oficina de Estadística-SIAU
23. Oficina Administrativa
24. Oficina de Promoción y Prevención
25. Oficina de Facturación
26. Oficina de Control Interno
27. Cuarto personal médico
28. Cuarto de enfermería
29. Lavandería
30. Cocina y cafetería
31. Parqueaderos
32. Depósito de residuos Hospitalarios
33. Cuarto de depósito de gases medicinales



## **7. DEFINICIÓN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**

Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo (art. 7 Decreto 1769 de 1994).

## **8. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO**

- Garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que administra y utiliza los recursos físicos para la prestación de servicios en el Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE
- Contribuir a que la atención en salud que brinda el Hospital Departamental San José de San José de Caldas ESE cumpla con las características de calidad y habilitación según el Decreto 2174 de 1996 y del Decreto 1011 del 2006.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y eficaz de los recursos físicos para la prestación de servicios en salud, obteniendo así el rendimiento pleno de la inversión económica en los recursos para atención en salud, contribuyendo a la reducción de los costos de operación en la institución.



## 9. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

- Garantizar la asignación de recursos económicos por parte de la institución. necesarios para desarrollar las labores de mantenimiento.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medio para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.
- Informar a la dirección el estado de los equipos biomédicos, equipos de comunicación, equipos de informática, muebles y planta física para la toma de decisiones y planeación de la asignación de recursos.

## 10. PLAN DE MANTENIMIENTO

El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al departamento o servicio de mantenimiento de cada institución.

El personal encargado del mantenimiento está contratado con la Empresa AMC SUMINISTROS el cual cuenta con personal capacitado para realizar esta labor, además, la empresa ha certificado que cumple con las condiciones de capacidad tecnológica y científica para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que brinda un servicio con calidad altamente confiable. También cuenta con un certificado de registro ante el INVIMA, el cual se anexa **(ANEXO 1)**



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA  
Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia



Bogotá D.C.

S.I.500-1191-10

Señor:  
JHON JABER HENAO ROJO  
Calle 50B No. 39 - 08  
Teléfono: 8750449  
Manizales - Caldas

ASUNTO: Inscripción Recurso Humano para Mantenimiento de Dispositivos Médicos Considerados Equipos Biomédicos según radicado No.10027038 de fecha 2010/04/21.

Por medio de la presente le informo que los documentos mencionados en el asunto, fueron recibidos en esta subdirección e ingresada la información en nuestra base de datos con el siguiente número de inscripción:

No INSCRIPCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR CLASE
RH-201004-287	JHON JABER HENAO ROJO	I, IIA, IIB y III

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.

Gracias por su información.

Atentamente,

ANA GRACIELA CRIADO AUSSANT  
Subdirectora de Insumos para la Salud y  
Productos Varios.

SE ARCHIVA EN CARPETAS INSCRIPCIÓN DE PERSONAL  
Proyectó: Ivette Xiomara Velez Aldana  
Profesional Contratista  
27/04/2010



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

**Hospital San José de San José de  
Caldas E.S.E**

## **PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**

**ENERO 2023**



## INDICE

<b>1.INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>15</b>
<b>2.MARCO LEGAL.....</b>	<b>2</b>
<b>3.DEFINICIONES .....</b>	<b>3</b>
<b>4.OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO .....</b>	<b>5</b>
<b>5.DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>6.RECURSO HUMANO .....</b>	<b>13</b>
<b>7.ANEXOS .....</b>	<b>14</b>



## 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del mantenimiento, independientemente de la aplicación en que se desarrolle debe lograr la reducción de las fallas, debe procurar la prolongación de la vida útil de los componentes y con ello reducir los costos de operación. Esto refleja resultados como la mejora continua de la calidad, el rendimiento de los productos y la eficiencia de los servicios.

En el caso de los equipos Biomédicos hospitalarios, el mantenimiento debe contribuir a elevar la eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan a los habitantes de una comunidad, a la mejora de la calidad asistencial, calidad que se verá afectada si no existe un adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones por más nivel profesional médico que exista.

No se puede olvidar que el hospital tiene una peculiaridad que lo distingue de los procesos productivos y es que se está tratando con vidas humanas, lo que obliga a tener un nivel de exigencia muy especial.



## 2. MARCO LEGAL

- Ley 100 de 1993. Congreso de la República de Colombia.
- Decreto 1769 de 1994. Ministerio de Salud.
- Resolución 4445 de 1996. Ministerio de Salud.
- Decreto 2174 de 1996. Ministerio de Salud.
- Circular 029 de 1997. Superintendencia Nacional de Salud.
- Resolución 3100 de 2019. Ministerio de la protección social.

## 3. DEFINICIONES

### **EQUIPO BIOMEDICO.**

Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

El equipo biomédico se clasifica en<sup>1</sup>:

- De diagnóstico son, por ejemplo: los equipos de rayos X, los ecógrafos, los equipos de medicina nuclear, los tomógrafos axiales computarizados, los equipos de resonancia magnética nuclear, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los

---

<sup>1</sup> Circular 029 de 1997



electroencefalógrafos, los Holter, los capnógrafos, los medidores de O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> indirectos, entre otros.

- De tratamiento y mantenimiento de la vida se consideran las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos exteriores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, los equipos de radioterapia y de terapia por radiaciones ionizantes, los equipos de diálisis, diatermias, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara ciéltica), entre otros.
- De rehabilitación se consideran los aparatos para: terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.
- De prevención pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.
- De análisis de laboratorio son, por ejemplo: los medidores de acidez o base, centrifugas, balanzas, baños de maría, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores para banco de sangre, etc.

#### 4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO

##### ■ 4.1. GENERALES

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza el equipo Biomédico del hospital.
- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los Equipos Biomédicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para



la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

#### ■ 4.2. ESPECIFICOS

- Lograr el desarrollo, conservación y mantenimiento adecuado de los equipos que posee el Hospital con los cuales se ejecutan las diferentes actividades propias del que hacer institucional.
- Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que posee El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Mantener los equipos en perfecto funcionamiento durante el mayor tiempo posible.
- Evaluar el funcionamiento de los equipos y realizar propuestas de actualización.
- Brindar asesoría sobre el manejo de los equipos al personal.
- Proyectar, en coordinación con los demás funcionarios, los programas de equipamiento y actualización de equipos en El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.



- Recolectar información sobre equipos, de manera que pueda dar asesoría a la administración y a los funcionarios sobre opciones de equipamiento.
- Archivar de manera sistemática los manuales de uso y de servicio de los equipos adquiridos por El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Garantizar las mediciones y condiciones de uso de los equipos para garantizar que los resultados obtenidos sean lo más exactos posible y redundando en el bienestar de la comunidad del área de influencia de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.
- Mantener los equipos Biomédicos de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. en óptimas condiciones de uso para la atención del cliente externo y bienestar de los funcionarios.

#### ■ 4.3 ALCANCE

Comprende la totalidad de los Equipos Biomédicos que pertenezcan o esté bajo la responsabilidad directa de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E.

Se pretende ejercer un control eficiente sobre las actividades de mantenimiento que permita al final de la vigencia, realizar una evaluación de los alcances y cumplimiento del plan la cual debe ser mayor al 85%, teniendo en cuenta que una de las principales metas para esta vigencia es que la Institución cumpla con los requisitos de habilitación.



## 5. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

El plan busca dar las orientaciones básicas para la ejecución de los procesos de mantenimiento del equipo Biomédico, para que en la institución se puedan realizar los inventarios y auditoría, Disponiendo de esta manera de las herramientas que les permita generar con criterios técnicos los proyectos encaminados a su mejoramiento.

Esta metodología contiene los procedimientos y mecanismos, para lograr un correcto inventario y valoración en el área de dotación de equipos Biomédicos.

### ■ 5.1. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarla prolongación de la vida útil de los mismos.

Se debe realizar una estricta supervisión del proceso de instalación o entrega de equipos para asegurar que se hace en forma exacta según los manuales, para asegurar el perfecto funcionamiento y la operatividad eficiente de este. En la carpeta del equipo queda un documento donde está el detalle del proceso de ajuste con distintos parámetros de medición que hace parte de la “Ficha Técnica” del mismo y es sumamente útil para referencias futuras.

Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye:



Limpieza, lubricación, revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.

A cada uno de los equipos se le lleva una carpeta en donde está detallada la trayectoria a través de los años.

#### **5.1.1. Información de los equipos.**

Se debe realizar un registro digitalizado de la información de los equipos Biomédicos en el software con el que cuenta la institución para este fin.

Para optimizar el sistema de información, se realizará la codificación de los equipos de la institución.

#### **5.1.2. Equipo Biomédico.**

Dadas las condiciones de la institución, la metodología para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, consiste en contratar con una empresa especializada estos servicios. Este contrato cubre los equipos biomédicos de baja, media tecnología que se encuentran ubicados en El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. Tales equipos se encuentran relacionados en el Anexo “Cronograma de actividades de mantenimiento a equipo biomédico”.

El alcance de este Contrato de Mantenimiento y Servicio es el siguiente: mantenimiento y cuidado de los equipos según el PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL mediante visitas pre-programadas según la necesidad del equipo. Ejecución de reparaciones o cambios para hacer efectivas las garantías. Atención a las llamadas en cualquier momento en que se presenten.

Están excluidos del cronograma otros equipos o dispositivos que, por su sencillez, bajo costo y tecnología, no inciden de forma significativa en la prestación de los servicios. Igualmente, se excluyen en esta sección los equipos de apoyo, la vidriería, el instrumental.



A partir de las revisiones al componente de mantenimiento se tienen identificadas ciertas necesidades referentes a los equipos de El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E., razón por la cual se determina que se deben gestionar las siguientes actividades:

- Realizar un estudio por equipo para determinar la correcta periodicidad con que se deben programar las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante.
- Revisar el comportamiento de los equipos a través de tiempo (línea de trazabilidad) para darle un carácter dinámico al plan de mantenimiento.
- Realizar la interventoría del contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
- Desarrollar los diferentes formatos que se necesitan para una correcta administración del mantenimiento.
- Capacitar al personal sobre la correcta utilización de los diferentes equipos.
- Desarrollar manuales de correcta utilización, repuestos y mantenimiento de todos los equipos.
- Coordinar la realización de las actividades de mantenimiento correctivo que se presenten.

### **CALIBRACIÓN DE EQUIPOS**

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación biomédica a la cuál le aplican estos servicios.

La idoneidad del laboratorio se verificará con:

- Certificados de calibración de patrones
- Registros INVIMA del personal del laboratorio



- Acreditación ante la ONAC, según corresponda.

Como resultado del proceso metrológico se requerirán los respectivos stickers para cada equipo calibrado y los certificados de calibración, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

## **5.2. MOVIMIENTO INTERNO DE ACTIVOS.**

Con el fin de mantener actualizado el inventario y evitar traumatismos al momento de realizar el conteo físico, y que al mismo tiempo los encargados de cada servicio tengan un control sobre los bienes que tengan a su cargo, se debe diseñar e implementar un formato para movimiento de activos, el cual debe ser diligenciado por el responsable del servicio y llevado al encargado de Mantenimiento, quien realizará la gestión administrativa para su respectiva aprobación e inclusión en la documentación y en el sistema.

## **■ 5.3 PAZ Y SALVO A FUNCIONARIOS**

En el momento de que un funcionario se retire del hospital, el encargado de mantenimiento deberá expedir un certificado de paz y salvo en cuanto a los equipos asignados al funcionario, en el cual se expedirán los datos básicos del funcionario retirado y de los equipos. Deberá estar firmado por la persona respectiva y el encargado de mantenimiento.

## **6. RECURSO HUMANO**

Para la administración del área de mantenimiento hospitalario, El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. tiene asignadas las diferentes funciones de este componente entre su gerente, El Dr. Cristian Camilo Gallego Aguirre, quien se encarga del componente administrativo al realizar todo el manejo documental, de planeación y la contratación, al igual que la Supervisión de las diferentes actividades de mantenimiento.



El Hospital San José de San José de Caldas E.S.E. garantizará la realización del mantenimiento de los equipos biomédicos, bajo la modalidad de contratación con personal idóneo y capacitado, el cual tendrá los elementos o herramientas necesarias para llevar a cabo dicho mantenimiento. Dicha idoneidad y capacidad técnica debe quedar demostrada y hacer parte del respectivo contrato.

Esta modalidad se emplea en la medida en que la institución no cuenta con el personal de planta ni con los elementos, herramientas o las instalaciones apropiadas para la realización de dichas labores.

## 7. ANEXOS

### **PROTOCOLO MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO**

#### ■ **PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO UNIVERSAL**

Revisión del estado físico del equipo, revisión sistema de alimentación de acuerdo a su subsistema, verificación de visualizadores, indicadores y/o programadores de variables en el equipo, chequeo de actuadores, pruebas funcionales y limpieza general.

#### **MANEJO DOCUMENTAL**

Se cuenta con software de mantenimiento que permite la fácil y constante actualización del inventario activo, de igual forma se puede verificar desde cualquier ordenador con acceso a internet e ingresando con la clave de usuario las HOJAS DE VIDA, REPORTES PREVENTIVOS, REPORTES CORRECTIVOS, CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DOCUMENTOS ANEXOS en formatos PDF.



Manizales, Enero 2023

Señores:

**HOSPITAL SAN JOSÉ**

San José – Caldas.

**Asunto: PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO**

Actividades realizadas a los diferentes equipos:

- **TENSIOMETROS.**
  - Verificación de funcionamiento.  
Limpieza de componentes y accesorios.
  - Comprobación de calibración de presión con tensiómetro de referencia, si el equipo verificado se encuentra desajustado se procede a su ajuste, el método usado es el de comparación de medidas.
  - Verificación de funcionamiento y limpieza general.
    - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.
- 
- **PESAS DE PISO CON TALLÍMETRO.**
  - Ajuste de plataforma de medida.
  - Ajuste de barras de medida.
  - Lubricación de guías, tensores y accesorios.



- Comprobación de calibración de peso con pesas de referencia, si el equipo verificado se encuentra desajustado, se procede a su ajuste, el método usado es el de comparación de medidas.
- Limpieza general, verificación de funcionamiento.
- Puesta en cero iniciales.

✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

- **NEBULIZADOR**

- Lubricación de motor.
- Ajuste de conectores de mangueras.
- Revisión de filtro de admisión de aire.
- Verificación de compresión.
- Limpieza interna y externa.

✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.

- **PESAS DE PISO**

- Verificación de calibración de peso con pesas de referencia,
- Ajuste de cero iniciales.
- Ajuste de plataforma.

✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

- **EQUIPOS DE ORGANOS**

- Limpieza de otoscopio, oftalmoscopio, mango, Revisión de contactos eléctricos.



- Verificación de funcionamiento, limpieza general.
- Revisión de sensores, circuito electrónico.
  - ✓ La limpieza del equipo debe ser Superficial, se deben limpiar de manera independiente Otoscopio y Oftalmoscopio no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto. Procurar que la solución de limpieza no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado,

- **ELECTROCARDÍOGRAFO.**

- Limpieza de chupas y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
  - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.
  - ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico.

- **DOPPLER FETAL**

- Revisión de transductor (HR)
- Limpieza de Cabezal
- Ajuste de parámetros funcionales.
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Limpieza general



✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de alcohol al 75%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado.

✓ No halar el cable del transductor, no enrollarlo al momento de su almacenamiento, verificar la polaridad de la batería cuando se realice el cambio de la misma

- **ELECTROCAUTERIO**

- Limpieza componentes eléctricos
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Revisión de electrodo disperso, electrodo activo e interruptor de pie.
- Verificación de funcionamiento.
- Limpieza interna y externa.

- ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado

- ✓ Revisar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica adecuada (120V). Revisar cables y accesorios.

- **ASPIRADOR**

- Limpieza de compresor.
- Limpieza de válvulas Flappers
- Revisión de diafragma
- Verificación de máximo nivel de vacío (Este no puede ser inferior de 35 cmHg).
- Lubricación
- Verificación de filtro
- Revisión de funcionamiento general.

- ✓ Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol étílico como por ejemplo SURFALKAN, usar un paño suave seco para

**"NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR"**

Carrera 2 N 5-14 – Teléfonos: 3116302529 - 3113165515

[hosajo5@gmail.com](mailto:hosajo5@gmail.com)



retirar el exceso del producto utilizado, **No** utilizar hipoclorito de sodio para su limpieza, ya que produce corrosión de partes metálicas, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.

- **OXIMETROS.**

- Limpieza de componentes electrónicos
- Revisión de sensores emisor, receptor
- Limpieza general
  - ✓ Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol etílico, usar un paño suave seco para retirar el exceso del producto.

- **MICROSCOPIOS**

- Limpieza de lentes, en oculares, objetivos.
- Limpieza de prismas.
- Lubricación de sistema mecánico.
- Revisión circuito eléctrico
- Limpieza general.
  - ✓ Realizar limpieza de lentes de oculares con alcohol isopropílico, utilizar aplicadores de algodón, no ejercer demasiada presión sobre el lente. Realizar limpieza superficial con una solución de alcohol etílico como por ejemplo SURFALKAN, usar un paño suave seco para retirar el exceso del producto utilizado, **No** utilizar hipoclorito de sodio para su limpieza.

- **MONITOR DE SIGNOS VITALES.**

- Limpieza de Accesorios y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión de sensor SPO2, Brazaletes de PNI.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.



- ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.
- ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos y accesorios en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico y de signos vitales.

- **DESFIBRILADOR.**

- Limpieza de Cables y electrodos
- Verificación de ajuste de parámetros de funcionamiento.
- Comprobación de funcionamiento con simulador de E.C.G.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
- Test de descarga a 200 o 100 Joules Según equipo.
- **Realizar protocolos para la desfibrilación, tener en cuenta los cuidados de manipulación del equipo, del paciente y del entorno.**
  - ✓ La limpieza y desinfección debe ser realizada con un paño suave y limpio, limpie la superficie exterior del equipo, con el paño humedecido en solución de Glutaraldehído al 2%, luego utilizar un paño seco para retirar los excesos del producto utilizado, procurar que la solución no ingrese al interior del equipo, realizar el procedimiento con el equipo apagado y desconectado.
  - ✓ El equipo se debe conectar a una toma con polo a tierra, para evitar o minimizar ruido eléctrico en la señal, verificar que el cable ECG, se encuentra bien conectado al equipo, ubicar correctamente los electrodos en el paciente, encender el equipo, iniciar la toma del registro electrocardiográfico, preparar el paciente para el procedimiento según protocolos.



## CAVITRÓN

- Limpieza de Cables y pieza de mano.
- Verificación de funcionamiento.
- Limpieza de interruptor de pie.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico.
- Limpieza general.
  - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

## AMALGAMADOR

- Revisión circuito eléctrico.
- Limpieza de estructura
- Ajuste de cucharillas
- Verificación de funcionamiento.
- Ajuste sistema mecánico.
- Limpieza interna y externa.
  - ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

## AUTOCLAVE.

- Limpieza de tanque
- Revisión circuito eléctrico.
- Limpieza de cámara
- Ajuste empaque
- Revisión de máxima presión de trabajo.
- Limpieza general.
- Revisión ajuste de puerta.



- ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto, para la limpieza del interior de la cámara en autoclaves de mesa, se debe utilizar un producto de características similares a la Cleandina.

### **LAMPARA DE FOTOCURADO**

- Limpieza interna y externa.
- Revisión de circuito eléctrico y Electrónico.
- Verificación de funcionamiento
- Limpieza de fibra
- Revisión de carga y baterías (Inalámbricas)

### **UNIDAD ODONTOLOGICA**

- Revisión de circuitos eléctricos
- Revisión de sistema neumático
- Revisión de sistema hidráulico.
- Revisión de presión de trabajo (Máx. 35 Libras)
- Verificación de funcionamiento de módulo de servicios.
- Limpieza de escupidera, verificación de funcionamiento.
- Limpieza interna y externa.

### **COMPRESOR.**

- Revisión de presión de trabajo. (80 - 100 Libras)
- Purga de sistema neumático.
- Revisión y ajuste de tubería.
- Revisión de sistema de control de presión.
- Verificación de funcionamiento de motores.
- Revisión de circuito eléctrico.
- Limpieza general.



### **PESA BEBÉ DIGITAL**

- Verificación de calibración de peso con pesas de referencia,
- Ajuste de cero iniciales.
- Ajuste de plataforma.
- Revisión circuito eléctrico y electrónico,

### **MONITOR FETAL**

- Revisión de circuitos electrónicos.
- Revisión de transductores TOCO y HR.
- Revisión de marcador de eventos.
- Revisión y limpieza de impresora.
- Verificación de parámetros funcionales.
- Comprobación de funcionamiento de controles.
- Limpieza general.

- ✓ La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o en su defecto alcohol al 75%, luego usar un paño seco para retirar los excesos del producto.

### **INCUBADORA.**

- Revisión de filtro de entrada de aire.
- Revisión de grupo motor (Ventilador y Resistencia)
- Verificación de funcionamiento de sensores de temperatura.
- Comprobación de funcionamiento control de temperatura
- Limpieza de cúpula en acrílico
- Limpieza de receptáculo de bebé.
- Revisión de ajuste de parámetros funcionales.
- Limpieza interna y externa.

La limpieza del equipo deber ser Superficial, no se debe usar hipoclorito de sodio, para su limpieza usar un paño húmedo con agua o solución jabonosa, NO usar alcohol al limpiar la cubierta en acrílico, usar un paño seco para retirar los excesos Agua o solución jabonosa.



## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

2023

### TRAUMA

DESCRIPCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS																											
TRAUMA																											
LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA "HANALUX" LUZ HALOGENA	55002462	169	SEMESTRAL	N.A			P																				Revisión de contactos, baterías Prueba de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
ELECTROCARDIOGRAFO ECG EDAN	360250-M20A10220019	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																				Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
DESFILIBRILADOR BIFASICO MARCAPASOS	BENEHEART D3 SERIE: EZ-08044867	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																				Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
DESFILIBRILADOR BIFASICO MARCAPASOS ESXTERNO WEL	87482	435	SEMESTRAL	oct-23			P																				Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
MONITOR SIGNOS VITALES EDAN Im50	360069-M18913530057	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																				Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG, SPO2, PNI y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIAS	N.A	16-498	SEMESTRAL	N.A			P																				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
LARINGOSCOPIO ADULTOS Y PEDIATRICO DE 8 VALVAS	N.A	16-505	SEMESTRAL	oct-23			P																				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	N.A	16-606	SEMESTRAL	oct-23			P																				SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR FOLEE HOO3-C	201015704030272	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																				SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

URGENCIAS - HOSPITALIZACION

URGENCIAS/OBSERVACION																								
TERMOHIGROMETRO DIGITAL (VITRINA MEDICAMENTOS)	N.A	16-570	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
LÁMPARA RODABLE LUZ HALÓGENA RITHER	N.A	102		oct-23		P																		Revisión de contactos, baterías Prueba de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
TERMOHIGROMETRO DIGITAL (VITRINA MEDICAMENTOS)	N.A	16-571	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
SIERRA CORTA YESO	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
PESA BEBE KEX GERMANI BS-011	N.A	16-543	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA DETECTO	EOO4160033-EOO8160121	16-533	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
PULSO OXIMETRO DE MANO 821 PEDIATRICO	N.A	16-523	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIÓMETROS PEDIÁTRICOS	CE 0050	N.A	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
TENSIOMETRO WELCH ALLYN	81218212859	16641	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD 300C2	202865300359	N.V	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN sys 6010	9142012105964	N.V	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5**

URGENCIAS/OBSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN sys 6010	9142012105988	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MONITOR DE SIGNOS CREATIVE MEDICALVITALES DELUXE 100	J3000QL00260	N.V	SEMESTRAL	oct-23			P																			Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TERMOMETRO INFRARROJO UT 300H URGENCIAS	ir2004018507	N.A	SEMESTRAL	oct-23			P																			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

## CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA																									
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARD WELTCHALLYN CONSULTORIO 1	ref 11720 GS 777	16-589	SEMESTRAL	N.A				P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA PESA BEBÉ SECA MODELO 354 COS 1	8354210200940	N.A	SEMESTRAL	oct-23				P										P							Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 1 GMD	N.A	16642N.A	SEMESTRAL	oct-23				P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 1	560042-M20A09560013	N.A	SEMESTRAL	oct-23				P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO CONSULTORIO 1	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23				P										P							Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS WELCH ALLYN CONSULTORIO 1	i9q30734 (verde)	N.A	SEMESTRAL	N.A				P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
NEBULIZADOR APEX CONSULTORIO 1	mo3ox06128	160582	SEMESTRAL	N.A				P										P							Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 1	181218192758	16642	SEMESTRAL	oct-23				P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ**  
**SAN JOSE CALDAS E.S.E**  
**NIT: 810.001.159-5**

CONSULTA EXTERNA																									
CONCENTRADOR DE OXIGENO AIRSEP CONSULTORIO 2	bub0115280012	16-579	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
EQUIPO ÓRGANOS Y SENTIDOS WELCH ALLYN PARED CONSULTORIO 2	ref 11720	16-590	SEMESTRAL	N.A					P																Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
NEBULIZADOR APEX CONSULTORIO 2	mo3ox06128	16-583	SEMESTRAL	N.A					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIÓMETRO WELCH ALLYN RODABLE CONSULTORIO 2	SN0604101	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 2	560042-M20A09560011	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
OXIMETRO DEDO CHOICEMMED MD300C2 COS 2	203009008961	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN CONSULTORIO 2	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 2 GMD	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
PESA BEBÉ SECA 354 CONS 2	8354063191006	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 2	181227173358	16643	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN CONSULTORIO 3	ref 11720	16-591	SEMESTRAL	N.A					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIOMETRO WELCH ALLYN CONSULTORIO 3	181227181559	16644	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A CONS 3	560042-M20A09560012		SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONS 3	GMD	N.V	SEMESTRAL	oct-23					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
FONENDOSCOPIO LITMANN QUALITY JEFE ENFERMERÍA	i12b46002	N.A	SEMESTRAL	N.A					P																SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

CONSULTA EXTERNA																											
TENSIOMETRO W.A JEFE ENFERMERÍA	110317194534	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
LÁMPARA CUELLO DE CISNE CITOLOGÍAS	N.V	16-412	SEMESTRAL	N.A					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO DIGITAL FARMACIA	N.V	16-551	SEMESTRAL	oct-23					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO DIGITAL FARMACIA	N.V	15-552	SEMESTRAL	oct-22					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO DIGITAL ESTADISTICA	N.V	16-553	SEMESTRAL	oct-23					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO DIGITAL CUARTO DE RESIDUOS	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO DIGITAL CUARTO DE OXIGENO	N.V	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Nebulizador NUBE	#####	N.A	SEMESTRAL	N.A					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Nebulizador NUBE	#####	N.A	SEMESTRAL	N.A					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Nebulizador NUBE	#####	N.A	SEMESTRAL	N.A					P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>

## MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO																						
DATOS GENERALES PRESTADOR																						
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5									COMPLEJIDAD				I	AÑO		2023					
					SAN JOSE				DEPARTAMENTO				CALDAS									
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA																ACTIVIDADES / ENCARGADO	
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
ELECTROCARDIOGRAFO SMART ECG SALE	SE33A030846958ZB	16-486	SEMESTRAL	oct-23								P									P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

MANTENIMIENTO																													
PARA MANTENIMIENTO																													contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
MONITOR SIGNOS VITALES IMEC 8	ew-29001585	16-428	SEMESTRAL	oct-23																								P	Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG, SPO2, PNI y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - AMC suministros
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM8	360001-m21308660016	16-752	SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MOD MEC- 1200	cc75-2409	N.A	SEMESTRAL	N.A																								P	Revisión de motor, térmicos, mangueras y acoples, cambio de filtro hidrofóbico, revisión de conexiones, limpieza general. Inspección interna y externa.Pruebas de funcionamiento - AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSÍOMETRO	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSÍOMETRO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSÍOMETRO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSÍOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN	111007164603		SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE AJUSTE DE PRESIÓN AMC
FONENDOSCOPIO RIESTER	DUPLEX		SEMESTRAL	N.A																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DE DEDO CHOICEMMED MD300C2	202865300352	16-714	SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
OXIMETRO DE DEDO CREATIVE MEDICAL PRINCE 100D	XCS108QL725148		SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR 7E-D	N.V	16-035	SEMESTRAL	N.A																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-101	O80.19068		SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR SMAF SXT-5A	L10.18.146		SEMESTRAL	oct-23																								P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

MANTENIMIENTO																																		
FONENDOSCOPIO BOKANG REF: BK3004	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
FONENDOSCOPIO BOKANG REF: BK3004	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
MONITOR FETAL EDAN F3	560034- M20908340003	16-704	SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE AJUSTE DE PRESIÓN <b>AMC</b>
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	1582231		SEMESTRAL	oct-23																						P							P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	152333		SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	164194		SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	152334		SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
CONCENTRADOR DE OXIGENO RESPIROSONICS	115033		SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
REGULADOR DE ROSCA RESPONSIVE			SEMESTRAL	oct-23																						P							P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

HOSPITALIZACION

HOSPITALIZACIÓN/HOMBRES/MUJERES/PEDIATRÍA																						
DATOS GENERALES PRESTADOR																						
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE SAN JOSE CALDAS E.S.E NIT: 810.001.159-5												COMPLEJIDAD				I	AÑO		2023		
					SAN JOSE				DEPARTAMENTO								CALDAS					
EQUIPO	SERIE	INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA	CRONOGRAMA																	
			MANTENIMIENTO	CALIBRACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
INCUBADORA "DAVID MEDICAL" YP 90A HOSPITALIZACION (PEDIATRIA)	06071002013	16-0297	SEMESTRAL	oct-23					P								P				ACTIVIDADES / ENCARGADO Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC	
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
CAMA ELECTRICA 2 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
BOMBA DE INFUSIÓN MEDCAPTAIN	SYS 6010	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P								P				Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC	
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A					P								P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC	



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5**

HOSPITALIZACIÓN/HOMBRES/MUJERES/PEDIATRÍA																											
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A						P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A						P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
CAMA ELECTRICA 3 PLANOS	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A						P										P							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC


**PARTOS**

PARTOS																											
TERMOHIGROMETRO DIGITAL		16572	SEMESTRAL	oct-23																							SE REALIZA LIMPIEZA, GENERAL <b>AMC</b>
TENSIOMETRO NEONATAL WELCHALLYN	80105074629	16-584	SEMESTRAL	oct-23																							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
UNIDAD PORTATIL DE Aspiración MODELO SXT5A MARCA SMAF	16-585	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	oct-23																							Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
CAMA PARA PARTOS DOMETAL	135-22--0000057052	16-538	SEMESTRAL	N.A																							SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
COLPOSCOPIO "GOLD WAY" S16-2000 ANEXOS CPU LK	22000511-010		SEMESTRAL	N.A																							Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

PARTOS																								
CONCENTRADOR DE OXIGENO AIRSEP	bub0115280009	16-581	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
INFANTOMETRO DLM DIGITAL DETECTO USA	C13020611	16-535	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
ELECTROCAUTERIO "ELLMAN"	0002595	333	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
FONENDO LITTMAN GRIS	I4N40158		SEMESTRAL	N.A		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
INCUBADORA "DAVID MEDICAL" MOD: YP-G-M1	ABZAZ10005	N.A	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
LAMPARA DE CALOR RADIANTE MOD-HKN- 9010	22170801008	16-537	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO+AD31NICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
LAMPARA AUXILIAR "WELCH ALLYN"	LS-135	337	SEMESTRAL	N.A		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
MESA EXAMEN PEDIATRICA C/BALANZA TALLIMETRO M	V1161119	16-536	SEMESTRAL	oct-23		P																		Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
MONITOR FETAL GENERAL MEDITECH	g6a171208	16-578	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
MONITOR FETAL EDAN F3	560034-M20C19260022	N.A	SEMESTRAL	oct-23		P																		SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>

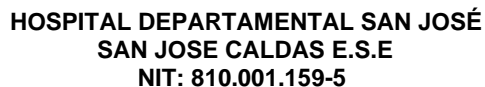

PARTOS																				
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50	360069-M18923530054	16-588	SEMESTRAL	oct-23		P									P					Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
TENSIOMETRO PEDIATRICO LORD AZUL	1064583	N.V	SEMESTRAL	oct-23		P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Bombas de infusión medcaptain modelo sys 6010	9142012106014	N.V	SEMESTRAL	oct-23		P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
DESFIBRILADOR MINDRAY D3 BENEHEART	EZ-08044867	N.V	SEMESTRAL	oct-23		P									P					SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>

**AMBULANCIA OVM 289**

AMBULANCIA OVM 289																															
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM8	360001-M21308650005	N.A	SEMESTRAL	oct-23							P															P				Revisión de motor, térmicos, mangueras y acoples, cambio de filtro hidrofóbico, revisión de conexiones, limpieza general. Inspección interna y externa. Pruebas de funcionamiento AMC	
TENSÍÓMETRO ADULTO WELCH ALLYN	140715195207	N.A	SEMESTRAL	oct-23							P																P				Inspección y revisión externa e interna, limpieza y verificación de cable ECG y electrodos, limpieza y chequeo de batería, contactos y conexiones, pruebas de funcionamiento - suministros AMC
			CUATRIMESTRAL																												
TENSÍÓMETRO PEDIÁTRICO ALP K2 874269	k2874269	N.A	SEMESTRAL	oct-23							P																P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
FONENDOSCOPIO ADULTO	LITTMANN	N.A	SEMESTRAL	N.A							P																P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
ASPIRADOR DE SECRECIONES CON DISPOSITIVOS PARA SUCCIÓN	c SS	16-504	SEMESTRAL	oct-23							P																P				SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC

Página 44 de 107



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

AMBULANCIA OVM 289																											
DESFIBRILADOR PRMEDIC XD 110XE	73675000317	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
REGULADOR MEDICINAL PRECALIBRADO 50 PSI	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
FLUJOMETRO DE PARED	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
REGULADOR YUGO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							


AMBULANCIA OUC 765																											
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM8	36001- M21308650090	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
FONENDOSCOPIO SPRAGUE LORD	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																							
TENSIÓMETRO DE ADULTO WELCHALYN	70613185071	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
TENSIÓMETRO DE MANO TYCOS CON BRAZALETE PED.	11213880	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
FLUJOMETRO SENCILLO AMVEX	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																							
ASPIRADOR DE SECRECCIONES FOLLE	H003-C 20101570430072	N.V	SEMESTRAL	oct-23																							



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

AMBULANCIA OUC 765																										
REGULADOR DE OXIGENO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						
REGULADOR DE OXIGENO YUGO PORTATIL	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						

AMBULANCIA JYP 698																										
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	302S00021F5	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						
FONENDOSCOPIO ADULTO BOKAND	N.A	N.A	SEMESTRAL	N.A																						
TENSIÓMETRO DE ADULTP	108166	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						
TENSIÓMETRO DE MANO BOKAND CON BRAZALETE PED.	11213880	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						
FLUJOMETRO SENCILLO AMVEX	1360064	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						
ASPIRADOR DE SECRECCIONES CAMI	163694	N.V	SEMESTRAL	oct-23																						
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	20210800270	N.A	SEMESTRAL	oct-23																						

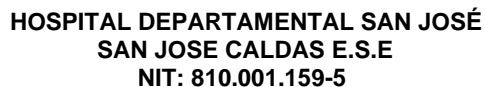

AMBULANCIA JYP 698																				
REGULADOR DE OXIGENO	1625133	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P								P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
DEA SAMARITAN PAD 360P	22E91133949B22	N.A	SEMESTRAL	oct-23					P								P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>

LABORATORIO CLÍNICO																													
INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO	N.V	6566	SEMESTRAL	oct-23										P												P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
INCUBADORA MEMMERT	N.V	95	SEMESTRAL	oct-23										P												P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
AGITADOR "CHEM" MOD.DRS	N.V	261	SEMESTRAL	N.A										P												P			Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
CENTRIFUGA "S.U.S" 12 TUBOS MODELO CM-120	N.V	263	SEMESTRAL	oct-23										P												P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
EQUIPO DE HEMATOLOGÍA RAYTO	821514026EQ	16-488	SEMESTRAL	N.A										P												P			SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
MICROPIPETA "BOECO" 100 - 100 UL	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-23										P												P			Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC
MICROPIPETA "BRAND" 5- 50 UL	N.V	11	SEMESTRAL	oct-22										P												P			Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC

Página 47 de 107



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

LABORATORIO CLÍNICO																												
MICROSCOPIO "OLYMPUS"	N.V	16-030	SEMESTRAL	N.A																								Revisión y limpieza general, inspección de ocular, prismas, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
TERMOHIGROMETRO AZUL GRANDE	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-23																								SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E"	N.V	N.V	SEMESTRAL	1/10/20223																								SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E"	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-23																								SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
PIPETA AUTOMATICA HUMAN 5-50UL	N.V	16-097	SEMESTRAL	oct-23																								Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
CENTRÍFUGA INDULAB C4	15986	N.A	SEMESTRAL	oct-23																								SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
EQUIPO DE QUÍMICA BA-88A	WR-0A035873	16-097	SEMESTRAL	oct-23																								Revisión y limpieza general, inspección de émbolo de aspiración, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

VACUNACION

VACUNACIÓN																												
ENFRIADOR INDUSTRIAL HTAL MARCA VESTFROST REF : MF304	200944	384	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE CONTROL, LIMPIEZA GENERAL AMC
CONGELADOR HTAL MARCA VESTFROST REF : MF214 BASE RODANT	200833	390	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE CONTROL, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA DETECTO	E004160042	16-534	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BASCULA DE PISO WELCHALLYN HEALTH O METER		415	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOHIGROMETRO MAX Y MIN	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MÍNIMAS CE PEQUEÑO	N.A	N.A	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT DE TENSÍOMETRO Y FONENDOSCOPIO	GMD	N.A	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT DE TENSÍOMETRO Y FONENDOSCOPIO	GMD	N.A	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	SE REALIZA LIMPIEZA,REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL AMC



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

APS –UNIDAD MOVIL

APS																											
Unidad odontológica portátil	N.V	16-592--16-593	SEMESTRAL	N.A																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ROJO	N.V	16-596	SEMESTRAL	N.A																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
TENSIOMETRO MANUAL LORD	N.V	17-597	SEMESTRAL	oct-03																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA DIGITAL MEDIDOR DE GRASA CORPORAL	2018041600612	16-594	SEMESTRAL	oct-23																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
BALANZA PESA BEBE DIGITAL	N.V	16-595	SEMESTRAL	oct-23																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
EQUIPO DE ORGANOS DE GMD	N.V	16-598	SEMESTRAL	N.A																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Oxímetro de pulso azul	N.V	16638	SEMESTRAL	oct-23																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Fonendoscopio pediátrico lord rosado	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5**

**UNIDAD MOVIL**

UNIDAD MÓVIL																													
Autoclave digital technology	0413-1668	16672	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	Revisión y limpieza general, inspección de conexiones eléctricas, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>	
Unidad odontológica draco	N.V	16670	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Compresor odontológico thomas	608996d	16671	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Amalgamador tpc	1130870	16674	SEMESTRAL	N.A																						P		P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
Lámpara de fotocurado dtm	20181230699	16673	SEMESTRAL	oct-23																						P		P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
Pieza de mano	201909161032	N.V	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Pieza de mano	201909161044	N.V	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Micro motor pieza de baja	0190410154	N.V	SEMESTRAL	N.A																						P		P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
Tensiómetro pediátrico	836572	16668	SEMESTRAL	oct-23																						P		P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento <b>AMC</b>
Fonendoscopio pediátrico	N.V	16667	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Tensiómetro adulto	N.V	16666	SEMESTRAL	oct-23																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>
Fonendo adulto	N.V	16665	SEMESTRAL	N.A																						P		P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL <b>AMC</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

UNIDAD MÓVIL																													
Pesa digital adulto	Gbs -903	16664	SEMESTRAL	oct-23																					P			P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Pesa bebe HEALTH O METER	3860010769	16662	SEMESTRAL	oct-23																					P			P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Equipo de órganos GMD	N.V	16663	SEMESTRAL	N.A																					P			P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
Lámpara cuello de cisne KRAMER	N.V	16661	SEMESTRAL	N.A																					P			P	Revisión y limpieza general, inspección de motor, mangueras, conexiones y filtros, ajuste general. Pruebas de funcionamiento AMC.

## ODONTOLOGIA

ODONTOLOGÍA																												
TEMOHIGROMETRO DIGITAL	N.V	N.V	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	Revisión y limpieza general, ajuste de conexiones eléctricas - hidráulicas, inspección de mangueras, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
LÁMPARA DE FOTOCURADO VERDE	N.V	16640	SEMESTRAL	oct-23																					P		P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
CAVITRÓN BONART	ART-M1 25K	16639	SEMESTRAL	N.A																					P		P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
AMALGAMADOR DOGITAL MILLNIUM	AAA12412	454	SEMESTRAL	N.A																					P		P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
CABEZA DE CONTRAANGULO NSK	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																					P		P	Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

ODONTOLOGÍA																											
CAVITRÓN BONART CON TURBO Y CONECTOR	ART-M1 25K	16-541	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y limpieza general, inspección de bombillo, circuito electrónico y temporizador, ajuste general, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
COMPRESOR JHON TOMAS DOS MOTORES	2660CE32- 1020569	16-529	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
LÁMPARA DE FOTOCURADO MORADA	112370	320	SEMESTRAL	oct-23																							Revisión y limpieza general, ajuste de conexiones eléctricas - hidráulicas, inspección de mangueras, pruebas de funcionamiento -AMC SUMINISTROS
LÁMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE	1275	438	SEMESTRAL	oct-23																							Revisión y limpieza general, prueba de fugas, ajuste de presión, purga de condensados, inspección de válvula de seguridad, ajuste general, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
PIEZA DE MANO NSK PANA MAX	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y limpieza general, inspección de bombillo, circuito electrónico y temporizador, ajuste general, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
PIEZA DE MANO NSK PANA MAX	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y ajuste general, lubricación sistema mecánico y neumático, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
UNIDAD ODONTOLÓGICA. HIGIENE ORAL	N.V	442	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y ajuste general, lubricación sistema mecánico y neumático, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
UNIDAD ODONTOLÓGICA. AZUL	N.V	16-542	SEMESTRAL	N.A																							Revisión y ajuste general, lubricación sistema mecánico y neumático, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

ODONTOLOGÍA																														
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL TROPHY CON INYECTO	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																										Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
PIEZA DE BAJA VELOCIDAD NSK	ABBZ0103 / EBEZ2873	N.V	SEMESTRAL	N.A																										Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
PIEZA DE BAJA VELOCIDAD NSK	EBD30730 / EBE 20377	N.V	SEMESTRAL	N.A																										Revisión y ajuste general, lubricación , pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL PUMA	N.V	N.V	SEMESTRAL	N.A																										Revisión y ajuste general, lubricación, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL FIAD - PRODENTAL	PRO 70/ 1194	N.V	SEMESTRAL	N.A																										Revisión y ajuste general, Revisión circuito electrónico, ajuste mecánico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



## ESTERILIZACION

ESTERILIZACIÓN																											
AUTOCLAVE AUTOMAT 5000	5000-0001	16-497	SEMESTRAL	oct-23																						P	Revisión y limpieza general, ajuste de conexiones eléctricas - hidráulicas, inspección de mangueras, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	N.A	16-573	SEMESTRAL	oct-23																						P	SE REALIZA LIMPIEZA, AJUSTE MECANICO, LIMPIEZA GENERAL AMC
AUTOCLAVE STAR CLAVE 18 LITROS	A18L0100	NT	SEMESTRAL	oct-23																						P	Revisión y limpieza general, ajuste y corrección de fugas, limpieza de eyectores, inspección sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento - AMC SUMINISTROS



### CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE

	VISITA 1	VISITA 2	VISITA 3	VISITA 4	VISITA 5	VISITA 6
CAMILLAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE (cantidad 5)	Marzo de 2021	Septiembre del 2021	Marzo del 2022	Septiembre de 2022	Marzo de 2023	Septiembre de 2023

### CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2023



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA D/M/A	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GUADAÑA HUSQVARNA	MANTENIMIENTO	16652	MENSUAL	30-27-27-24-29-26-31-28-25-30-27-26-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES, LIMPIEZA.
PLANTA ELECTRICA UNIDAD MOVIL	MANTENIMIENTO	16655	CUATRIMESTRAL	17-01-2023 16-05-2023 19-09-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE CARGA, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES
PLANTA ELECTRICA HOSPITAL	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	17-01-2023 16-05-2023 19-09-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE CARGA, INDICADORES, PARTES MÓVILES, ACEITE, PRUEBAS FUNCIONALES, FILTROS , AGUA
HIDROLAVADORA 2 HP	MANTENIMIENO	427	CUATRIMESTRAL	03-01-2023 02-05-2023 05-09-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, PRUEBA DE PRESIÓN, PARTES MÓVILES, PRUEBAS FUNCIONALES
NEVERA LG	COCINA	406	CUATRIMESTRAL	07-02-2023 06-06-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES, PASRTES MÓVILES, PARTES



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

				10-10-2023		ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
Nevera autofrost 8 pies Mabe	LABORATORIO	16-265	CUATRIMESTRAL	07-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES,PASRTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				06-06-2023		
				10-10-2023		
nevera samsung 4 pies	FARMACIA	N/P	CUATRIMESTRAL	07-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES,PASRTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				06-06-2023		
				10-10-2023		
Nevera Samsung 4 pies	SANEAMIENTO	345	CUATRIMESTRAL	07-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES,PASRTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				06-06-2023		
				10-10-2023		
CHALLENGER Nevera	RESIDUOS PELIGROSOS	N/P	CUATRIMESTRAL	07-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES,PARTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS PRUEBAS FUNCIONALES
				06-06-2023		
				10-10-2023		
PURIFICADOR DE AGUA	COCINA	129	CUATRIMESTRAL	15-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO FÍSICO, INDICADORES,PASRTES MÓVILES, PARTES ELECTRICAS , FILTRO, PRUEBAS FUNCIONALES
				14-06-2023		
				18-10-2023		
REDES	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	15-02-2023	JUAN DAVID	VERIFICACIÓN DE:



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

ELÉCTRICAS	HOSPITAL	CUATRIMESTRAL	14-06-2023	LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	FUNCIONALIDAD Y ESTADO DE TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLES Y FOCOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
			18-10-2023		
REDES HIDRICAS	HOSPITAL	CUATRIMESTRAL	15-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE TUBERÍAS, GRIFOS, BAÑOS, DUCHAS, PRESENCIA DE FUGAS.
			14-06-2023 18-10-2023		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (UNO)	HOSPITAL	TRIMESTRAL	04-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.  ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
			04-04-2023 12-07-2023 02-10-2023		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (DOS)	HOSPITAL	TRIMESTRAL	02-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.  ACTIVIDAD REALIZADA
			10-05-2023		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSÉ CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

				15-08-2023		POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				07-11-2023		
TANQUE DE RESERVA DE AGUA (TRES)	HOSPITAL	TRIMESTRAL		01-03-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FUGAS, NIVEL DE LLENADO, LIMPIEZA, TUBERÍAS.  ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				20-2023		
				12-09-2023		
				04-12-2023		
TECHOS	HOSPITAL	CUATRIMESTRAL		13-02-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CANALES.  ACTIVIDAD REALIZADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, VERIFICADA POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
				01-06-2023		
				23-10-2023		
ÁREA CONSTRUIDA	HOSPITAL			23-01-2023	JUAN DAVID LONDONO	ESTADO DE PINTURA, CIELORRASO, PISOS,



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

			CUATRIMESTRAL	24-05-2023	QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	PUERTAS Y VENTANAS.
				01-09-2023		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	23-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN DE: FECHAS DE CADUCIDAD DE EXTINTORES, BARANDAS DE SEGURIDAD, CINTAS ANTIDESLIZANTES, TIMBRES Y ALARMAS.
				24-05-2023		
				01-09-2023		
AMBULANCIA TOYOTA MODELO 2008	HOSPITAL	OUC 765	CUATRIMESTRAL	12-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS, INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS
				20-05-2023		
				16-09-2023		
AMBULANCIA DIMAX 2015	HOSPITAL	OVM 289	CUATRIMESTRA	12-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS ,INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS
				20-05-2023		
				16-09-2023		
AMBULANCIA CHEVROLET COLORADO 2023	HOSPITAL	JY P698	CUATRIMESTRA	12-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS ,INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS
				20-05-2023		
				16-09-2023		
CAMIONETA TOYOTA MODELO 1994	HOSPITAL	OUC 773	CUATRIMESTRA	12-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INDICADORES, LUCES Y PRUEBAS MECÁNICAS
				20-05-2023		



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

				16-09-2023		
UNIDAD MOVIL FOTON 2020	HOSPITAL	OVM353	CUATRIMESTRAL	12-01-2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE: INSTRUMENTOS ,INDICADORES, LUCES ,ALARMAS, DOTACIÓN Y PRUEBAS MECÁNICAS.AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE AGUA.
				20-05-2023		
				16-09-2023		
ÁREAS VERDES	HOSPITAL		MENSUAL	30-27-27- 24-29-26- 31-28-25- 30-27-26- 2023	JUAN DAVID LONDONO QUINTERO JEFE MANTENIMIENTO	VERIFICACIÓN: CORTE DE PRADOS
VENTANAS (49)	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	06-03-2023	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION: ESTADO DE VIDRIOS, MARCOS, PINTURA Y SU FUNCIONAMIENTO
				17-07-2023		
				14-11-2023		
PUERTAS (63)	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	06-03-2023	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION: ESTADO DE MARCOS, PINTURA, LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y SU FUNCIONAMIENTO
				17-07-2023		
				14-11-2023		
MUEBLE DE USO ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO	HOSPITAL		CUATRIMESTRAL	13-03-2023	JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO JEFE DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION :ESTADO DE MUEBLES, OBSERVACIÓN DE BROMA, COMEJÉN SILLAS FRACTURADAS Y SU FUNCIONAMIENTO
				04-07-2023		
				21-11-2023		



## INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

**1. Organización:** Dispone de una dependencia responsable de un mantenimiento hospitalario:

Si     JUAN DAVID LONDOÑO QUINTERO

**2. Plan de mantenimiento:** Verifique y escriba si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura: Si

**2.2** Verifique y escriba si hay un plan de mantenimiento de la dotación: Si

**3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento:** Número de profesionales:

**3.2** Número de técnicos: 1 técnico biomédico contratado AMC SUMINISTROS

**3.3** Número de auxiliares: 1 bachiller técnico

**4. Recurso financiero:**

**4.1** Indique como asignan y distribuyen los recursos para el mantenimiento hospitalario: Según contrato de mantenimiento y disposición del Médico Director

**4.2** Recurso previsto para el mantenimiento hospitalario \$108.000 del presupuesto total

**4.3** Recursos asignados en el presente año para el mantenimiento de la dotación \$ 49.400

**4.4** Recursos asignados en el presente año para el mantenimiento de la infraestructura \$ 4.000



**4.5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA \$ 39.600 Y OTROS \$ 15.000.**

**5. Gestión del servicio del mantenimiento:** Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento: Las áreas que reciben mantenimiento son Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, Odontología, Sala de Esterilización, Sala de toma de citología, Sala de partos, Laboratorio, Vacunación, Cocina, Lavandería, Oficinas Administrativas

**5.2** Describa quien y como se realizan las auditorías de los contratos de mantenimiento que celebran en la institución con empresas: Las interventorías son realizadas por el Gerente y la Jefe de Enfermería.

**5.3** Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos: Se tiene institucionalizado el formato de eventos adversos de los cuales se realizan informes de intervención en caso de presentarse un evento.

**5.4** Tienen registro de actividades del servicio de mantenimiento en la institución: Si, se tiene registro de todas las actividades realizadas en el servicio de mantenimiento tanto de las acciones correctivas como de las preventivas.

**5.5** Lleva hoja de vida de los equipos: Si, se tienen hojas de vida de todos los equipos.

**5.6** El servicio de mantenimiento tiene presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos.

- Realiza asesoramiento cuando se adquiere un equipo
- Se realiza inducción al personal nuevo
- Se realizan capacitaciones de manera periodica.

**5.7** Conoce el Decreto 1769 de 1994 sobre mantenimiento hospitalario: el técnico de mantenimiento tiene conocimiento del Decreto, el cual será socializado con el personal de salud

**5.8** Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación: Para el año 2023 se tiene un cronograma de capacitación



al personal de mantenimiento. AMC SUMINISTROS tiene el personal contratante debidamente actualizado.

## **6. Inventarios:**

**6.1** Planos de las redes: Si, el inventario está completo

**6.2** Equipos biomédicos: Si, el inventario está completo

**6.3** Equipos industriales de uso hospitalario: Si, el inventario está completo

**6.4** Planos de las áreas físicas: Si, el inventario está completo

**6.5** Equipos de comunicaciones e informática: Si, el inventario está completo

**6.6** Muebles de uso asistencial y administrativo: Si, el inventario está completo

**6.7** Otros equipos y elementos no contemplados en los ítems: No

## **7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento**

**7.1** Tiene talleres para el mantenimiento: No se cuenta con un espacio exclusivo para el mantenimiento por falta de recursos para la infraestructura

**7.2** Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de respuestas: Si, se cuenta con una oficina donde el técnico ingresa la información.

## **8 Dotación del servicio de mantenimiento:**

**8.1** Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos: No

**8.2** Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos: Si, se cuenta con las herramientas necesarias para realizar las actividades

**8.3** Dispone de manuales técnicos de los equipos: Se tienen los manuales de los equipos de la institución.



## 9. Verificación de mantenimiento de dotación

9.1 Mantenimiento de equipo biomédico	Pr.	Co.	Est.
9.1.1 Equipo de diagnóstico			
ELECTROCARDIOGRAFO 1	X		1
ELECTROCARDIOGRAFO 2	X		1
ELECTROCARDIOGRAFO 3		X	3
EQUIPO DE ORGANOS 1	X		1
EQUIPO DE ORGANOS 2	X		1
EQUIPO DE ORGANO 3	X		1
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL APS	X		1
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL UNIDAD MOVIL FOTON	X		1
EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO	X		1
FONENDOSCOPIO VACUNACION	X		1
FONENDOSCOPIO VACUNACION	X		1
FONENDOSCOPIO JEFE ENFERMERIA	X		1
FONENDOSCOPIO (AMBULANCIA) OVM289	X		1
FONENDOSCOPIO (URGENCIAS)	X		1
FONENDOSCOPIO (AMBULANCIA) OUC 765	X		1



FONENDOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD MOVIL	X		1
FONENDOSCOPIO ADULTO UNIDAD MOVIL	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULTO1	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULTO 2	X		1
FONENDOSCOPIO CONSULT 3		X	2
FONENDOSCOPIO APS	X		1
FONENDOSCOPIO APS ROSADO	X		1
FONENDOSCOPIO SALA DE PARTOS		X	2
FONENDO RAPPAPORT vacunación	X		1
FONENDO RAPPAPORT vacunación	X		1
FONENDO RAPPAPORT mantenimiento	X		1
FONENDO RAPPAPORT mantenimiento	X		1
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO BK3004 MANTENIMIENTO	X		1
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO BK3004 MANTENIMIENTO	X		1
FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC II MANTENIMIENTO		X	2
FONENDOSCOPIO GRIS LORD MANTENIMIENTO		X	2
MONITOR FETAL partos	X		1



MONITOR FETAL partos	X		1
MONITOR FETAL mantenimiento	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES mantenimiento		X	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES mantenimiento		X	2
MONITOR SIGNOS VITALES mantenimiento	X		1
MONITOR SIGNOS VITALES ambulancia ouc 765	X		1
MONITOR SIGNOS VITALES ambulancia ovm 289	X		1
MONITOR SIGNOS VITALES ambulancia JYP 698			
MONITOR DE SIGNOS VITALES urgencias	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES partos	X		1
MONITOR DE SIGNOS VITALES trauma	X		1
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA (CONSULTA EXTERNA)	X		1
BALANZA PESA BEBE urgencias			
PESA DE PISO VACUNACION	X		1
BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA VACUNACION	X		1
BALANZA DIGITAL MASA CORPORAL APS	X		1
BALANZA PESA BEBE APS	X		1
BALANZA PESA BEBE CONSULTA EX cónsultor 1	X		1



BALANZA PESA BEBE CONSULTA EX consultor 2	X		1
BALANZA PESA BEBE UNIDAD MOVIL	X		1
BALANZA DIGITAL MASA CORPORAL unidad movil	X		1
TENSIOMETRO MANUAL VACUNACION	X		2
TENSIOMETRO MANUAL VACUNACION		X	3
TENSIOMETRO PEDIATRICO VACUNACION			
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 1	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 1	X		1
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 2	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 2	X		1
TENSIOMETRO MANUAL CONSULT 3	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO CONSULTORIO 3	X		1
TENSIOMETRO MANUAL (AMBULANCIA OUC765)	X		1
TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO(AMBULANCIA OUC765	X		1
TENSIOMETRO MANUAL (AMBULANCIA OVM 289)	X		1
TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO (AMBULANCIA OVM 289)	X		1



TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO (AMBULANCIA JYP698			
TENSIOMETRO MANUAL (AMBULANCIA JYP 698			
TENSIOMETRO MANUAL (CONSULTA EXTERNA-URGENCIAS)	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO (CONSULTA EXTERNA-URGENCIAS )	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO PARTOS	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO PARTOS		X	2
TENSIOMETRO RODABLE (CONSULTORIO 2)	X		1
TENSIOMETRO APS PEDIATRICO	X		1
TENSIOMETRO ADULTO APS	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO RAPPAPORT MAN	X		1
TENSIOMETRO PEDIATRICO UNIDAD MOVIL	X		1
TENSIOMETRO ADULTO UNIDAD MOVIL	X		1
VIDEOCOLPOSCOPIO	X		1
PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 1	X		1
PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 2	X		1



PULSOXIMETRO CURVA CONSULTORIO 3	X		1
PULSOXIMETRO CURVA URGENCIAS	X		1
PULSOXIMETRO CURVA MANTENIMIENTO	X		1
PULSOXIMETRO DE CURVA CONSULTA EXTERNA	X		2
OXIMETRO DE PULSO APS	X		1
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PARTOS	X		2
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO CONSULTA EXTERNA		X	3
<b>9.1.2 Equipo para tratamiento y mantenimiento de la vida</b>	Pr.	Co.	Est.
AMALGAMADOR	X		1
ASPIRADOR PORTATIL (TRAUMA)	X		1
ASPIRADOR PORTATIL (PARTOS)	X		1
ASPIRADOR (AMBULANCIA OVM 289)	X		1
ASPIRADOR (AMBULANCIA JYP 698)			
ASPIRADOR ( MANTENIMIENTO		X	2
ASPIRADOR ( MANTENIMIENTO		X	2
ASPIRADOR AMBULANCIA OUC765	X		1
ASPIRADOR MANTENIMIENTO	X		1



COMPRESOR ODONTOLÓGICO	X		1
COMPRESOR ODONTOLÓGICO UNIDAD MOVIL	X		1
DESFIBRILADOR MINDRAY D-3	X		1
DESFIBRILADORWELCH ALLYN PIC 30 TRAUMA	X		2
DESFIBRILADOR TRAUMA	X		1
DESFIBRILADOR PARTOS	X		1
DESFIBRILADOR AMBULANCIA JYP 698			
ELECTROCAUTERIO (PARTOS)	X		1
ESCALADOR		X	3
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA		X	3
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA	X		2
LÁMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA INALAMBRICA	X		1
LÁMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA UNIDAD MOVIL	X		1
LÁMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA ODONTOLOGIA	X		1
LARINGOSCOPIO (URGENCIAS)	X		1
LARINGOSCOPIO (TRAUMA)	X		1
MICROMOTOR CON CONTRAANGULO	X		1
MICROMOTOR CON CONTRA-ANGULO	X		1



MICROMOTOR CON CONTRA-ANGULO	X		1
NEBULIZADOR CONSULTORIO 1	X		1
NEBULIZADOR CONSULTOR 2	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
NEBULIZADOR URGENCIAS	X		1
PIEZA DE ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
PIEZA ALTA	X		1
CAVITRON	X		1
INCUBADORA	X		1
SCALER ULTRASONIDO	X		1
SCALER ULTRASONIDO	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1
BOMBA DE INFUSIÓN	X		1



9.1.3 Equipo para rehabilitación	Pr.	Co.	Est.
CONCENTRADOR DE OXIGENO (1 PUESTO)	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO( 1 PUESTOS)	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
CONCENTRADOR DE OXIGENO	X		1
9.1.4 Equipo para prevención			
9.1.5 Equipo para análisis de laboratorio	Pr.	Co.	Est.
AGITADOR DE MAZINI	X		1
AGITADOR DE PIPETAS	X		1
EQUIPO DE HEMATOLOGIA RAITO	X		1
EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA REI	X		1
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA		X	3
BAÑO MARÍA	X		2



CENTRÍFUGA	X		2
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	X		1
MICROSCOPIO	X		2
PIANO CUENTA CELULAS	X		2
PIPETA	X		1
PIPETA	X		1
INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO	X		1
PIPETA AUTOMATICA	X		1
<b>9.2 Mantenimiento de equipo industrial de uso hospitalario</b>	<b>Pr.</b>	<b>Co.</b>	<b>Est.</b>
<b>9.2.1 Equipo para lavandería y cocina</b>			
HIDROLAVADORA	X		1
LAVADORA	X		3
PURIFICADOR DE AGUA	X		1
AMBULANCIA	X		1
AMBULANCIA	X		1
AMBULANCIA	X		1
UNIDAD MOVIL	X		1



<b>9.2.2 Equipo para esterilización y autoclaves</b>	Pr.	Co.	Est.
AUTOCLAVE ESTERILIZACION	X		2
AUTOCLAVE ESTERILIZACION	X		1
AUTOCLAVE UNIDAD MOVIL	X		1
<b>9.2.3 Equipo de refrigeración y aire acondicionado</b>			
REFRIGERADOR VACUNACIÓN	X		1
CONGELADOR VACUNACIÓN	X		1
NEVERA URGENCIAS	X		1
NEVERA FARMACIA	X		1
NEVERA LABORATORIO	X		1
NEVERA COCINA	X		1
NEVERA SANEAMIENTO	X		1
<b>9.2.4 Calderas, bombas, plantas eléctricas</b>	Pr.	Co.	Est.
PLANTA ELÉCTRICA HOSPITAL	X		1
PLANTA ELÉCTRICA UNIDAD MOVIL	X		1
PLANTA ELÉCTRICA HOSPITAL	X		1



9.2.5 Otros industriales de uso hospitalario	Pr.	Co.	Est.
LÁMPARA AUXILIAR (URGENCIAS)	X		1
LÁMPARA AUXILIAR UNIDAD MOVIL	X		1
LÁMPARA AUXILIAR (TRAUMA)	X		1
LÁMPARA CUELLO DE CISNE (PARTOS)	X		1
LÁMPARA CUELLO DE CISNE (CITOLOGIA)	X		1
CAMA PARA (PARTOS)	X		2
CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIA(TRAUMA)	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	X		1
NEGATOSCOPIO 1	X		2



NEGATOSCOPIO 2	X		2
REGULADOR DE OXIGENO AMBULANCIA OUC 765	X		1
REGULADOR DE OXIGENO AMBULANCIA OVM 289	X		1
REGULADOR DE OXIGENO TRAUMA	X		1
REGULADOR DE OXIGENO PARTOS	X		1
REGULADOR DE OXIGENO MANTENIMIENTO	X		1
SIERRA CORTAYESOS	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA 1	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA 2	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	X		1
UNIDAD ODONTOLOGICA UNIDAD MOVIL	X		1
LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	X		1
<b>9.2.6 Equipos de seguridad</b>	<b>Pr.</b>	<b>Co.</b>	<b>Est.</b>
BARANDAS DE SEGURIDAD BAÑOS	X		1
BARANDAS DE SEGURIDAD CAMAS	X		1
CINTAS ADHESIVAS	X		1



EXTINTORES	X		1
<b>9.3 Mantenimiento de muebles para uso administrativo y para uso asistencial</b>	<b>Pr.</b>	<b>Co.</b>	<b>Est.</b>
ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS (17)	X		2
ESCRITORIOS ASISTENCIALES (11)	X		2
CAMAS ASISTENCIALES (11)	X		1
CAMILLAS ASISTENCIALES (6)	X		2
CAMAS ADMINISTRATIVAS( 3)	X		1
CAMILLA (1) TRAUMA	X		1
SILLAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES (20 )	X		2
SILLAS RIMAX (23)	X		2
SILLAS PLEGABLE PLASTICAS 8 APS	X		1
SILLAS PLEGABLE PLASTICA 4 UNIDAD MOVIL	X		1
MESA PLEGABLE CANTIDAD (2 ) APS	X		1
MESA PLEGABLE UNIDAD MOVIL	X		1
CARPA PARA ATENCION EXTRAMURAL	X		1
CARPA PARA ATENCION EXTRAMURAL	X		1
PLEGABLE PARA PROYECTOR 1	X		1



9.4 Mantenimiento de equipos de comunicaciones de informática	Pr.	Co.	Est.
TODO EN UNO DELL TECLADO DELL MAUS DELL ADMON	X		1
PC-DE ESCRITORIO HP MODELO 24-DF0004 ADMON 2	X		1
CPU POWER MONITOR SAMSUNG TECLADO MAUSE ADMON 2	X		1
COMPUTADOR PORTATIL HP MANTENIMIENTO	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W LABORATORIO	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1101W ADMON 1	X		1
IMPRESORA EPSON L555 ADMON 2	X		1
SCANNER CANNON LIDE ADMON 1	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMAR TANK 530 ADMON 2	X		
IMPRESORA DESKJET 845	X		1
IMPRESORA HP LASER JETP PROM12 VACUNACION	X		1
TODO EN UNO HP (CONTROL INTERNO)	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W CONTROL	X		1



INTERNO			
IMPRESORA HP LASER JET P1102W FACTURACION	X		1
SERVIDOR CPU SUPER W RITEMASTER MONITOR LG FLATRON MAUS GENIUS TECLADO GENIUS FACTURA	X		1
FOTOCOPIADORA RICOH MP2851 FACTURACION	X		1
SCANNER CANNON LIDE FACTURACION	X		1
COMPUTADOR TODO EN UNO DELL FACTURA	X		1
COMPUTADOR ATX PROCESA MONITOR SAMSUNG FACTURACION	X		1
CPU JANUS MONITOR HP 7540 (ESTADI)	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W ESTADI	X		1
CPU ARGON TECH MONITOR LENOVO THINKVISION TECLADO LENOVO MAUS GENIUS SANEA	X		1
IMPRESORA HP LASER JET P1102W CONSULTA EXTERNA	X		1
ESCANER HPDESKJET 3050 CONSULTA EXTERNA	X		1
CPU POWER MONITOR LENOVO TECLADO LENOVOMAUS LENOVO CONSULT 1	X		1



TODO EN UNO LENOVO TECLADO LENOVO MAUS GENIUS ODONTOLOGIA	X		1
CPU HACER ASPIRE MONITOR HACER TECLADO MAUSE ODONTOLOGIA	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2110 ODONTOLO	X		1
PC-DE ESCRITORIO MODELO 24-DF0004 HP GERENTE	X		1
COMPUTADOR PC SMART AIO GOB21-A VACUNACION	X		1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMAR TANK 530 PYP	X		1
PC INTEL CORE i3 monitor 19,5 POWER GROUP CONSULTA EXTERNA			
PC INTEL CORE i3 monitor 19,5 POWER GROUP CONSULTORIO 3	X		1
CPU POWER MONITOR LENOVO TECLADO MAUSE CONSULTORIO 2	X		1
<b>10 Verificación del mantenimiento de la infraestructura</b>	<b>Pr.</b>	<b>Co.</b>	<b>Est.</b>
<b>10.1 Mantenimiento de edificios</b>			
ÁREA CONSTRUIDA	X		2



<b>10.2 Mantenimiento de instalaciones físicas</b>	Pr.	Co.	Est.
TANQUE DE RESERVA DE AGUA	X		1
TECHOS	X		2
VENTANAS (49)	X		2
PUERTAS (64)	X		2
<b>10.3 Mantenimiento de sistemas de redes</b>	Pr.	Co.	Est.
REDES ELÉCTRICAS	X		2
REDES HIDRICAS	X		1
<b>10.4 Mantenimiento de áreas adyacentes</b>	Pr.	Co.	Est.
GUADAÑADORA	X		2
AREAS VERDES	X		2



### INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 2023

ODONTOLOGIA					
UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO
ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	DENSPLY	VARI MIX III	91852	1600-03-06
ODONTOLOGIA	CAVITRON	SCALER	ART-M1	C23222	16541
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	PUMA	PORTATIL	S/S	1600-9006
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	124458	1600-438
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	BEYOND	3000	112370	1600-0320
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA	VERDE			16640
ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA	MORADA			16720
ODONTOLOGIA	RX PERIAPICAL	FIAD	S/M	1194	1600-0037
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	BELL-DENT	S/M	1141-80	1600-442
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	BELL-DENT	S/M	S/S	16542
ODONTOLOGIA	COMPRESOR	JHON TOMAS DOS MOTORES	N-A	2660CE32	16-529
ODONTOLOGIA	CAVITRON SCALER ULTRASONIDO	MAVERICK	ART		16639
ODONTOLOGIA	TERMOHIGROMETRO	N-A	N-A	N-A	16550
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		20101903	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		DBF80228	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK		ABJ20096	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO			ABB20103-EBE22873	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO			ABE2D359	
ODONTOLOGIA	PIEZA DE BAJA Y CONTRAANGULO		NSK	0BD30730-0BD60050	
<b>CONSULTA EXTERNA</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
CONSULTA EXTERNA	PESA BEBE DIGITAL	HEALTH O METER	553		16543
CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	18218192758	
CONSULTORIO 1	PESA BEBE DIGITAL	BABY SCALE 354	3541317004		16708
CONSULTORIO 1	PULSOOXIMETRO				16712
CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16717
CONSULTORIO 1	FONENDOSCOPIO	LITTMAN NEGRO	GMD 20-T20	901039 REF	
CONSULTORIO 1	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	S/M	S/s	16589
CONSULTORIO 1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115190403	16580
CONSULTORIO 1	NEBULIZADOR	COMPREEN	APEX	100100278	16582
CONSULTORIO 1	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042-M20A09560011	16693
CONSULTORIO 2	NEBULIZADOR	COMPREEN	APEX	100100957	16583
CONSULTORIO 2	PULSOXIMETRO				16710
CONSULTORIO 2	PESA BEBE DIGITAL	BABY SCALE 354	3441317004		16709
CONSULTORIO 2	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042-M20A09560013	16694
CONSULTORIO 2	CONCENTRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115280012	16579
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	060410125800	
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK		
CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16718
CONSULTORIO 2	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN		S/S	16590



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

CONSULTORIO 2	FONENDOSCOPIO	CLASSIC II	LITTMAN	I17C33698	
CONSULTORIO 3	FONENDOSCOPIO	LITTMAN VERDE	CLASSIC 11	19Q30734	
CONSULTORIO 3	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560042-M20A09560012	16695
CONSULTORIO 3	PUSOXIMETRO				16713
CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK		
CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO PEDIATRICO		S/M	S/s	16719
CONSULTORIO 3	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN		S/S	16591
CITOLOGIAS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	S/S	1600-412
JEFE ENFERMERIA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN		110317194534	
JEFE ENFERMERIA	FONENDOSCOPIO	LITTMAN		I12B46002	
CONSULTORIO 1	TERMOMETRO INFRAROJO				
CONSULTORIO 2	TERMOMETRO INFRAROJO				
CONSULTORIO 3	TERMOMETRO INFRAROJO				
HOSPITALIZACION MUJERES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518341	16675
HOSPITALIZACION MUJERES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518351	16676
HOSPITALIZACION HOMBRES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518346	16677
HOSPITALIZACION HOMBRES	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518355	16678
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	LOS PINOS	840 FI252	518306	16679
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90 <sup>a</sup>	06071002013	16-410
HOSPITALIZACION	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20A09230006	16704
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS	DISPROMEDICS			16685



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

	PLANOS				
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16686
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-687
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-688
CUARTO COVID-19	CAMA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS	DISPROMEDICS			16-689
<b>TRAUMA Y URGENCIAS</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
TRAUMA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	S/M	S/S	16-505
TRAUMA	SUCCIONADOR SXT	STAGE	H003-C	20101570403007 2	16-716
TRAUMA	LAMPARA AUXILIAR	HANALUX	4 FOCOS	S/S	1600-0169
TRAUMA	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-08044867	16-692
TRAUMA	MONITOR DE SIGNOS	EDAN	IM8	360001- M21308650090	
TRAUMA	DEFIBRILADOR				435
TRAUMA	CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIA				16-498
URGENCIAS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	CE-0050		
URGENCIAS	TENSIOMETRO ADULTO	LOR GRIS			
URGENCIAS	PULSO OXIMETRO ADULTO				16-711
URGENCIAS	TENSIOMETRO ADULTO		S/S		
URGENCIAS	PULSO OXIMETRO PEDIATRICO	821	S/s		16-523



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

URGENCIAS	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20908340003	16703
URGENCIAS	BALANZA C/TALLIMETRO ELECTRONICA	S/M	E004160033-E008160121		16-533
URGENCIAS	SIERRA CORTA YESOS	M-PAC	4183-106	38843	1600-183
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				16571
URGENCIAS	TERMOHIGROMETRO				16570
URGENCIAS	TERMOMETRO INFRAROJO				
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	2020331010003746	16705
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	2020331010001616	16706
URGENCIAS	NEBULIZADORES APEX		GMRN	20200331010001610	16707
MANTENIMIENTO	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SMART SE-3	SE33A030346058 ZB	1600-486
TRAUMA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	360250-M20A10220019	16696
URGENCIAS	FONENDOSCOPIO	LITMAN	CLASSIC II	I12C61229	
URGENCIAS	LAMPARA AUXILIAR	RITTER	S/M	S/S	
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW29001585	16-428
URGENCIAS	CONCENTRADOR DE O2	KAIYA	S/M	S/S	16-498
URGENCIAS	BOMBA DE INFUSION			9142012106014	
URGENCIAS	GLUCOMETRO	MATCH	OK-1B	DB1G182211	
URGENCIAS	GLUCOMETRO	MATCH	OK-1B	DB1G182213	
<b>ESTERILIZACION</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	STAR CLAVE		A18L-0100	
ESTERILIZACION	TERMOHIGROMETRO				16573
ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	AUTOMAT	5000	RS-2009DM-0003197	
<b>PARTOS</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
PARTOS	MONITOR FETAL	CGENERAL MEDITECH	20171208	G6A171208	16578
PARTOS	VIDEO COLPOSCOPIO	GOLD WAY	SLC(2000)	22000511-010	16-0294
PARTOS	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA	S/S	
PARTOS	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	S/S	
PARTOS	INCUBADORA NEONATAL	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-920	A10BZA03005	16698
PARTOS	SUCCIONADOR	SXT5A	EMAC	L1418-065	16585
PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M18923530054	16588
PARTOS	SUCCIONADOR	SXT5A	EMAC	L1018-146	16586
PARTOS	LAMPARA DE CALOR RADIANTE		HKN-9010	22170801008	16-532
PARTOS	ELECTROCAUTERIO	ELLMAN	FFPF EMC	0002595	333
PARTOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	TYCOS	SUPER SHO RESISTANT	18010506074629	16584
PARTOS	INFANTOMETRO DIGITAL	DLM	DETECTO	C13020611	16-535
PARTOS	CAMA PARTOS	DOMETAL		135-22- 0000057052	16-538
PARTOS	MESA EXAMEN PERIATICAL C/BALANZA TALLIMETRO	MIDMAR	640-0001-231	V1161119	16-536
PARTOS	DEFIBRILADOR				16691
PARTOS	TENSIOMETRO MANUAL	LORD AZUL			
PARTOS	TERMOHIGROMETRO				16571
PARTOS	BOMBA DE INFUSION			9142012105988	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

PARTOS	CONCENTRADOR DE OXIGENO	AIRSEP		BUB0115280009	16581
<b>LABORATORIO</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
LABORATORIO	AGITADOR DDE MAZZINI	LAB ROTATOR	DSR 2100V	S/S	16-261
LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS	S/M	S/M	S/S	1600-264
LABORATORIO	MICROSCOPIIO	OLYMPUS	CHS	3L0159	1600-030
LABORATORIO	CENTRIFUGA 24 TUBOS	INDULAB	O4-SPECIAL	15986	16690
LABORATORIO	BAÑO MARIA	MEMMERT	S/M	w 200	1600-O093
LABORATORIO	PIPETA	BOECO	100-1000µL	7031053	
LABORATORIO	PIPETA	HUMAN	5-50µL	06955	16-097
LABORATORIO	PIPETA	BRAND	5-50µL	01A8734	16-011
LABORATORIO	HORNO DE CULTIVOS	MEMMERT	VM-100	S/S	1600-0095
LABORATORIO	ANALIZADOR DE BIOQUIMICA	RAYTO	RT-1904C	401601042ET	16-487
LABORATORIO	ANALIZADOR DE QUIMICA				16697
LABORATORIO	INCUBADORA PARA CONTROL BIOLOGICO				16566
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO				
LABORATORIO	TERMOHIGROMETRO				
LABORATORIO	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	RAYTO	RT-7600S	821514026EQ	16-488
<b>VACUNACION</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
VACUNACION	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK304	20094471122	
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				16604
VACUNACION	CONGELADOR	VESTFROST	MK804	20083381669	
VACUNACION	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN			
VACUNACION	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN			
VACUNACION	BALANZA C/TALLIMETRO	DETECTO		E004160042	16-534



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

	ELECTRONICA				
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				
VACUNACION	FONENDO				
VACUNACION	FONENDO				
VACUNACION	PESA DE PISO				
VACUNACION	TERMOHIGROMETRO				
<b>AMBULANCIA</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
AMBULANCIA ouc765	TENSIOMETRO pediátrico	CERTIFIED	S/M	S/M	
AMBULANCIA ouc765	TENSIOMETRO adulto	TYCOS	S/M	3490	
AMBULANCIA ouc765	ASPIRADOR DE SECRECIONES	STAGE	H003-C	20101570403027 2	16715
AMBULANCIA OUC 765	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001- M21308650005	16-751
AMBULANCIA OUC765	FONENDOSCOPIO				
AMBULANCIA OVM 289	ASPIRADOR DE SECRECIONES	S/M	S/M	S/S	
AMBULANCIA OVM 289	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	LIGHT WEIGHT	S/S	
AMBULANCIA OVM 289	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	PEDIATRICO	874269	
AMBULANCIA OVM 289	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	CE0297	SN140715195207	
AMBULANCIA OVM 289	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	M290	73675000317	
AMBULANCIA OVM 289	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	360001- M21308660016	16-752
AMBULANCIA JYP 698	Tensiometro adulto			108166	
AMBULANCIA JYP 698	Fonendoscopio adulto				
AMBULANCIA JYP 698	Tensiometro pediatrico				
AMBULANCIA JYP 698	Fonendoscopio pediatrico generico				



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

AMBULANCIA JYP 698	DEA samaritan pad 360p			22E91133949B22	16-763
AMBULANCIA JYP 698	Succionador cami			162694	16-762
AMBULANCIA JYP 698	Monitor de signos vitales			302S00021F5	16-761
<b>FARMACIA</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO				16551
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO (MAXIMAS- MINIMAS)				
FARMACIA	TERMOHIGROMETRO				16552
<b>CUARTO DE OXIGENO</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
CUARTO DE OXIGENO	TERMOHIGROMETRO				16600
<b>ESTADISTICA</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
ESTADISTICA	TERMOHIGROMETRO				16553
<b>KIT DE VIOLENCIA</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
KIT VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	TERMOHIGROMETRO				166601
<b>APS</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
APS	OXIMETRO DE PULSO 20115				16638
APS	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL				16592-16593



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

APS	EQUIPO DE ORGANO DE PASTA	GMD	2TF-100		16598
APS	BALANZA PESA BEBE DIGITAL				16595
APS	BALANSA DIGITAL MEDIDOR GRASA CORPORA	GMD	BD-1522		16594
APS	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD			16596
APS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD			16597
APS	Fonendo pediátrico	rosado			
<b>UNIDAD MOVIL</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
UNIDAD MOVIL	AUTOCLAVE	DIGITAL TECHNOLOGY	DTGL	0413-1668	16672
UNIDAD MOVIL	UNIDAD ODONTOLOGICA	DRACO	APOLO		16670
UNIDAD MOVIL	AMALGAMADOR	D-650	TPC	1130870	16674
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE MANO	DTM		201909161032	
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE MANO	DTM		201909161044	
UNIDAD MOVIL	PIEZA DE BAJA O MICROMOTOR	DTM		0190410154	
UNIDAD MOVIL	LAMPARA DE FOTOCURADO	DTM	LY-A180	20181230699	16673
UNIDAD MOVIL	TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	DK2001	836572	16668
UNIDAD MOVIL	FONENDO PEDIATRICO	BOKANG			16667
UNIDAD MOVIL	TENSIOMETRO ADULTO	FAV-A01			16666
UNIDAD MOVIL	FONENDO PEDIATRICO	FAV-A01			16665
UNIDAD MOVIL	PESA BEBE	HEATHO OMETER	386KGS-01	3860010769	16662
UNIDAD MOVIL	PESA DIGITAL ADULTO	TRANSTEK	GBS-903		16664
UNIDAD MOVIL	EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2050-01		16663
UNIDAD MOVIL	LAMPARA DE CUELLO DE CISNE				16661
<b>MATENIMIENTO</b>					
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>ACTIVO</b>
MANTENIMIENTO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SUCTION UNITED	7E-D	S/S	16-035
MANTENIMIENTO	CENTRIFUGA	SUS	CM-120	089	1600-263
MANTENIMIENTO	DEFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	87482	1600-435



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

MANTENIMIENTO	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-101	080.19068	16434
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16699
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16700
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16701
MANTENIMIENTO	KIT FONENDO Y TENSIOMETRO	GMD	0123		16702
MANTENIMIENTO	FONENDO	LITTMANN		18U28978	
MANTENIMIENTO	PULSOXIMETRO				16714
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		115033	16649
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		01582231	16645
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0152333	16646
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0164194	16647
MANTENIMIENTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	RESPIRONICS EVERFLO		0152334	16648
MANTENIMIENTO	TERMOMETRO INFRAROJO				
MANTENIMIENTO	PULSO OXIMETRO PEDIATRICO	821	S/S		16-524
MANTENIMIENTO	DOPPLER FETAL		SONOTRAX II pro		16540
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC75-2409	1600-0299
MANTENIMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M18923530057	16587
MANTENIMIENTO	BOMBA DE INFUSION				
MANTENIMIENTO	BOMBA DE INFUSION				
MANTENIMIENTO	FONENDO PEDIATRICO				
MANTENIMIENTO	FONENDO PEDIATRICO	BOKAN	BK30021		
MANTENIMIENTO	TEMOMETROS INFRAROJOS CANTIDAD( 18)		FI01		
MANTENIMIENTO	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCHALLYN	TYCOS	111007164603	



### INVENTARIO MUEBLES Y ENSERES

TIPO	MARCA	UBICACION
Silla RODACHINES CON	NEGRA	ADMINISTRACION
mesas	MADERA	ADMINISTRACION
ARMARIO PUERTAS DOS	METALICO	ADMINISTRACION
Silla RODACHINES CON	NEGRA	ADMINISTRACION
silla 1	RIMAX	ADMINISTRACION
Vitrina metálica	2 vidrios 1 entrepaño	JEFE ENFERMERIA
Silla madera	CORDOBAN NEGRO	ADMINISTRACION
Escritorio en L madera aglomerada 150cmx75 cm	Escritorio	ADMINISTRACION
mesa Modulo Auxiliar	MESA	ADMINISTRACION
Mesa computador	MESA	ADMINISTRACION
Estante metálico. 11	METALICOS	ARCHIVO
Silla plástica s/b	RIMAX	COCINA
Silla plástica s/b	RIMAX	COCINA
Silla pastica c/b.	RIMAX	COCINA
Mesa plástica redonda	RIMAX	COCINA
Escritorio Subgerente tipo	METALICO	CONSULTA EXTERNA
SILLA Plástica	RIMAX	CONSULTA EXTERNA



TIPO	MARCA	UBICACION
SILLA Plástica	RIMAX	CONSULTA EXTERNA
Silla engonomica rodachines	negra	CONSULTORIO # 1
Silla Plástica	RIMAX	CONSULTORIO # 1
Escritorio madera,	MADERA	CONSULTORIO # 1
nochero metálica	METALICO	CONSULTORIO # 1
Silla plástica	RIMAX	CONSUTORIO # 2
Silla ergonomica rodachines	negra	CONSULTORIO # 2
Nochero	METALICO	CONSULTORIO # 2
Escritorio madera	MADERA	CONSULTORIO # 2
Sillas Plástica	RIMAX	CONSULTORIO # 3
Sillas ergonomica rodachines	negra	CONSULTORIO # 3
Nochero metálico	METALICO	CONSULTORIO # 3
Escritorio cajón	MADERA	CONSULTORIO # 3
Cama de 1.40	MADERA ANDALUZ	CUARTO HOSPITAL
Nochero	MADERA BOSTON	CUARTO HOSPITAL
Silla Plástica	RIMAX	DIRECCION
Silla ergonomica rodachines	blanca	DIRECCION
Escritorio madera	MADERA	MANTENIMIENTO
Escritorio en L metal y vidrio	vidrio	DIRECTOR



TIPO	MARCA	UBICACION
Silla plástica	RIMAX	DIRECTOR
Camarote	TUBULAR MEMPHIS	CUARTO AUXILIARES ENFERMERAS
Silla pre escritorio	PRESIDENTE	ESTADISTICA
escritorio	MADERA	ESTADISTICA
Estantes 4	MADERA	ESTADISTICA
Estante 4	MADERA	ESTADISTICA
Escalerilla tubular	MTALICA	ESTADISTICA
Escalerilla Tubular	METALICAS	ESTADISTICA
Armario	METALICO	ESTADISTICA
Vitrina	METALICA	ESTADISTICA
Vitrina	METALICA	ESTADISTICA
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FACTURACION
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FACTURACION
Repisa de pared	MADERA	FACTURACION
Mesa	MADERA	FACTURACION
Mesa	MADERA	FACTURACION
Escritorio	MADERA	FACTURACION
Escritorio	MADERA	FACTURACION
Armario	METALICO	FACTURACION
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	FARMACIA



TIPO	MARCA	UBICACION
escalerilla	RIMAX	FARMACIA
escalerilla	METALICA	FARMACIA
Mesa	MADERA	FARMACIA
Estante	METALICO	FARMACIA
Estante 5 entrepaños	MADERA	FARMACIA
Estante 5 entrepaños	MADERA	FARMACIA
Cama electrica 2	electronica	HOSPITALIZACION OMBRES
SILLA	RIMAX	HOSPITALIZACION HOMBRES
NOCHERO	METALICO	HOSPITALIZACION HOMBRES
Cama electrica	ELECTRICA	HOSPITALIZACION MUJERES
SILLA	RIMAX	HOSPITALIZACION MUJERES
NOCHERO	METALICA	HOSPITALIZACION MUJERES
BIOMBO	MADERA	HOSPITALIZACION MUJERES
MESA COMPUTADOR	MADERA	JEFE ENFERMERIA
SILLA RIMAX	RIMAX	JEFE ENFERMERIA
Silla	RIMAX	JEFE DE ENFERMERIA
Estante 4	METALICO	JEFE DE ENFERMERIA
Cajón	MADERA	BACTERIOLOGIA



TIPO	MARCA	UBICACION
Butaca	METALICO	BACTERIOLOGIA
Silla ergonomica rodachines	NEGRA	BACTERIOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	BACTERIOLOGIA
Archivador	METALICO	BACTERIOLOGIA
armario	METALICO	MANTENIMIENTO
MESA COMPUTADOR	MADERA	MANTENIMIENTO
Silla ergonomica rodachines	negra	ODONTOLOGIA
SILLA ergonomica rodachines	negra	ODONTOLOGIA
Mesa metálica de noche	METALICO	ODONTOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	ODONTOLOGIA
Escritorio	METALICO	ODONTOLOGIA
Caja plástica	RIMAX	ODONTOLOGIA
Archivador	METALICO	ODONTOLOGIA
Cama electrica	electrica	PEDIATRIA
Silla	Rimax	PEDIATRIA
Silla ergonomica rodachines	Negra	PYP
Mesa COMPUTADOR	MADERA	PYP
Escritorio	METALICO	PYP
Silla Azul 3puestos 1	METALICA	SALA ESPERA
Tándem 4 puestos. 2	METALICAS	SALA ESPERA



TIPO	MARCA	UBICACION
Tándem Largo azul 1	METALICAS	SALA ESPERA
Silla	RIMAX	SANEAMIENTO
Silla ergonómica rodachines	Negra	SANEAMIENTO
Escritorio computador	METALICO	SANEAMIENTO
Archivador	METALICO	SANEAMIENTO
Vitrina	Metálica	URGENCIAS
Vitrina	METALICA	URGENCIAS
gaveta	PLASTICA	URGENCIAS
Vitrina	METALICA	VACUNACION
mesa café	MADERA	VACUNACION
Silla ergonómica rodachines	negra	VACUNACION
Estante 6 puestos	METALICA	VACUNACION
Archivador 4 cajones	Metálico	vacunación
Archivador 4 cajones	Metálico	Vacunación
Escritorio computador	MADERA	VACUNACION
SILLA	RIMAX	PSICOLOGIA
SILLA	RIMAX	PSICOLOGIA
MESA COMPUTADOR	MADERA	PSICOLOGIA
VITRINA	METALICA	JEFE ENFERMERIA
SILLAS PLEGABLES 8	PLASTICAS	APS
SILLA PLEGABLES 4	PLASTICAS	UNIDAD MOVIL



TIPO	MARCA	UBICACION
MESA PLEGABLE	PLASTICA	UNIDAD MOVIL
MESA PLEGABLE 2	PLASTICA	APS
PLEGABLE PARA PROYECTOR	PASTA	APS
BIOMBO DOS CUERPOS APS	METALICO AZUL	APS
CAJONERO POR 3	PLASTICOS	CYD
ESCRITORIO INFANTIL	PLASTICO	CYD

**INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CRONOGRAMA DE  
MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
computador todo en uno Lenovo serie:CS00976461	ADMINISTRACION	16507	Julio de 2023
Computador Dell todo en uno doble canal teclado y mouse serie HO9OPV1	ODONTOLOGIA	378	Julio de 2023
Computador portátil HP	JEFE DE MANTENIMIENTO	483	Julio de 2023
Computo torre atx procesa monitor Samsung ZZD3H44LG900002Y	ADMINISTRACION	16519	Julio de 2023
IMPRESORA HP LASER JETP1102W SERIE VND3531647	LABORATORIO	16514	Julio de 2023
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMAR TANK 530 SERIE CNOBC3S5H2	ADMINISTRACION	16-729	Julio de 2023



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
PC DE ESCRITORIO 24-DF0004	ADMINISTRACION	16-726	Julio de 2023
IMPRESORA HP LASER JET P1101W SERIE VND3R76632	ADMINISTRACION	16510	Julio de 2023
IMPRESORA EPSON L555 SERIE 54VY053O45 MODELO C463B	ADMINISTRACION	16508	Julio de 2023
SCANNER CANNON LIDE	ADMINISTRACION	16530	Julio de 2023
IMPRESORA HP LASER JET P1102	JEFE ENFERMERIA	16-452	Julio de 2023
pc hp pantalla ancha todo en uno	JEFE ENFERMERIA	16619	Julio de 2023
COMPUTADOR TODO EN UNO HP OMNI 100 PC	LABORATORIO	16-426	Julio de 2023
impresora hp laser jet pro m102w	FARMACIA	16-620	Julio de 2023
Impresora hp LASERJET PROM12W BLANCA	VACUNACION	16-531	Julio de 2023
COMPUTADOR TDO EN UNO DELL S/R J090P DOBLE CANAL	FACTURACION	16-210	Julio de 2023
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MP2851	FACTURACION	16541	Julio de 2023
Computador torre ATX procesa monitor Samsung TECLADO MAUSE	FACTURACION	16-520	Julio de 2023
Servidor CPU SUPER WRITEMASTER SERIE AJ2002955000017 MONITOR LG FLATRON E1942	FACTURACION	16-167	Julio de 2023
SMART UPS RT 5000	FACTURACION	16-223	Julio de 2023
SCANNER CANNON LIDE	PROMOCION Y PREVENCIÓN	16529	Julio de 2023



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
Computador TODO EN UNO HP TTOUCHSMART 310 PC SERIAL MXX129033R MODELO 310121ULA	PROMOCION PREVENCIÓN Y	16-416	Julio de 2023
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMAR TANK 530	PROMOCION PREVENCIÓN Y	16-728	Julio de 2023
Impresora HP laser jet p1102w VND3M19182	FACTURACION	16-417	Julio de 2023
CPU LG ARGON TECH MONITOR LENOVO THINKVISION	SANEAMIENTO AMBIENTAL	16-374-16--375	Julio de 2023
ESCANER HP DESKJET 3050 SERIE CN1493D3N2	SANEAMIENTO AMBIENTAL	16-430	Julio de 2023
Computador torre ATX procesa monitor Samsung	CONSULTA EXTERNA	16522	Julio de 2023
scanner hp desjet3051 CN149393HN	CONSULTA EXTERNA		Julio de 2023
Impresora hp LASERJET p1102	CONSULTA EXTERNA		Julio de 2023
CPU POWER MONITOR ACER AX30 MDG300 2GB	CONSULTORIO 1	16-521	Julio de 2023
PC INTEL CORE i3 monitor LG 19,5	CONSULTORIO 2	16617	Julio de 2023
CPU LG ARGOM TECH SERIE G18RGAD22H16G1851 MONITOR ACER P186V SERIE ETLPZ0W0031380E	CONSULTORIO 3	16-448	Julio de 2023
CPU HACER ASPIRE MODELO AX1430 MONITOR HACER MODELO P186HV SERIE ETLP20W0031380E6674322	FARMACIA	16-336 16-314	Julio de 2023



DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2110	ODONTOLOGIA	16-730	Julio de 2023
CPU HACER ASPIRE MODELO AX1430 MONITOR ACERP186HV SERIE ETLpz0W0031381114F4322	ODONTOLOGIA	16-441 16-443	Julio de 2023
COMPUTADOR PCSMART A10 GOB21-A SERIAL P2957011500574	VACUNACION	16517	Julio de 2023
CPU POWER SERIE C100IMP6315RXE MONITOR LENOVO SERIE V1NK282	PARTOS	16506-16181	Julio de 2023
PC INTEL CORE i3 monitor LG 19,5	Urgencias	16618	Julio de 2023
Monitor HACER P186HV teclado y mause	ESTADISTICA	16-461	Julio de 2023
impresora hp laser jet pro m102w	ESTADISTICA	16622	Julio de 2023
PC DE ESCRITORIO MODELO 24-DF0004	GERENTE	16-727	Julio de 2023
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	VACUNACIÓN	16627	Julio de 2023
COMPUTADOR PORTATIL DE MESA HP LAPTOP BLANCO	PSICOLOGIA	16604	Julio de 2023
VIDEO BEAM EPSON PL S39	APS	16606	Julio de 2023



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5

*Cristian Camilo G.*  
CRISTIAN CAMILO GALLEGO  
GERENTE

*Juan David Londono Q.*  
JUAN DAVID LONDONO QUINTERO  
JEFE DE MANTENIMIENTO



## ANEXOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS, ESE  
NIT 810.001.159-5

### ANEXO 4

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS ESE, CRISTIAN CAMILO GALLEGU AGUIRRE,

#### CERTIFICA:

PUBLICO: X  
PRIVADO

Que durante la vigencia fiscal comprendido entre el (1) de Enero y al 31 de Diciembre de 2023 la asignación y ejecución de recursos correspondientes a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación es la que se detalla a continuación:

CONCEPTO	RECURSOS INICIALES	(%)	RECURSOS DEFINITIVOS	(%)	EJECUCION A	(%)	PAGOS A 31 DE	SALDO A
	(1)		(2)		DICIEMBRE		DICIEMBRE	EJECUTAR A 31 DICIEMBRE
1.Total de Ingresos	2043198	100	2043198	100%	0 %		0	2043198
2.Valor de los Contratos con la Nación y con las entidades Territoriales (3)								
3.Recursos asignados a								
3.1 Mantenimiento de la infraestructura	4000	100%	4000	100%	0 %		0	4000
Edificios								
Instalaciones Fisicas	4000		4000		0		0	
Sistema de Redes								
Areas Adyacentes								
Otros								
3.2 Mantenimiento de la Dotacion	49400	100%	49400	100%	0 %		0	49400
Equipo Biomedico	49400		49400		0		0	0
Imágenes Diagnosticas								
Laboratorio								
Terapia, tratamiento y rehabilitación								
Otros de Diagnostico								
De mantenimiento de la vida UCI								
Otros								
3.2.1 Equipo Industrial de uso Hospitalario	54600	100%	54600	100%	0 %		0	54600
Plantas electricas								
Equipos de Lavanderia y cocina								
Bombas de Agua, Calderas								
Autoclaves y esterilización								
Refrigeración y aire acondicionado								
Relacionados con equipos de apoyo								
Otros	15000	100	15000	100%	0 %		0	15000
Muebles de uso Administrativo y Asistencial								
Equipo de Comunicaciones e Informatica	39000		39000	100%	0 %		0	39000
Total	108000		108000		0		0	108000

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y A LA DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS a los 7 días del mes de Enero de 2022.

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	DEFINITIVO
VALOR MANTENIMIENTO FUNCIONAM	15.000.000		15.000.000
VALOR MANTENIMIENTO EN INVERSI	93.000.000		93.000.000
TOTAL MANTENIMIENTO DEL 5% DEL I	108.000.000		108.000.000

REPRESENTANTE LEGAL

CRA 2 NRO 5-14  
DIRECCION

CALDAS  
DEPARTAMENTO

JEFE MANTENIMIENTO

8608684  
TELEFONO

SAN JOSE  
MUNICIPIO

CONTADOR

8608568  
FAX



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ  
SAN JOSE CALDAS E.S.E  
NIT: 810.001.159-5



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS E.S.E.  
NIT 810.001.159-5

EL GERENTE Y EL CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN

Que el Hospital Departamental San José de San José Caldas, ESE, Nit 810.001.159-5, para la vigencia fiscal 2023 se tiene Presupuestado en el rubro de Mantenimiento tanto en Funcionamiento y en Inversión la suma de CIENTO OCHO MILONES DE PESOS (\$108.000.000) M.CTE

Dado en San José Caldas, a los 4 días del mes de enero de 2023.

  
CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE

GERENTE

  
SANDRA MORALES JARAMILLO  
CONTADORA

"NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR"